


Potência. Flexibilidade.
Praticidade.

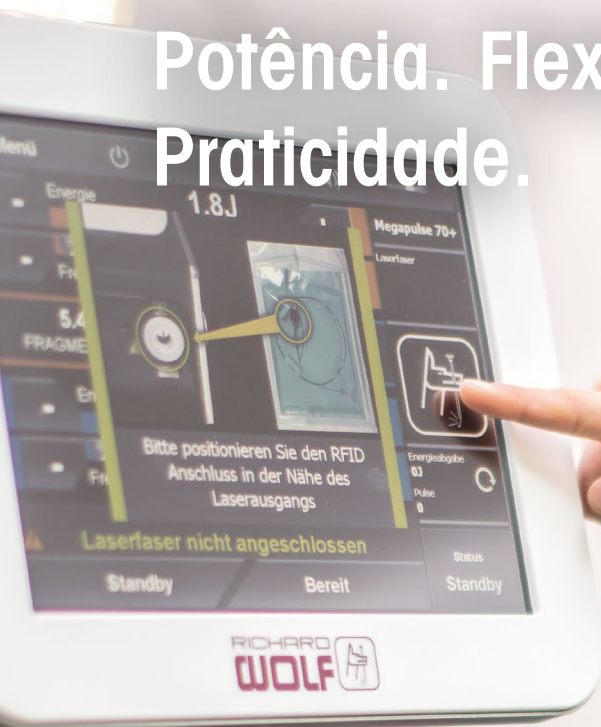

MEGA *Pulse* ⁷⁰⁺

Sistema a laser 70W Holmium:YAG

MEGA *Pulse* 70⁺

Potência. Flexibilidade. Praticidade.

O MegaPulse 70+ é a mais nova incorporação à linha de produtos a laser Richard Wolf. O sistema é adequado para uma grande variedade de opções de tratamento e proporciona aos usuários potência, versatilidade e uma excelente relação custo-benefício.

MegaPulse 70⁺ – Descubra os benefícios.

Potência.

Desenvolvido para impressionar. O **MegaPulse 70⁺** oferece frequência e energia superiores, e um modo EXPERT, que permite ao usuário selecionar comprimentos de pulso de forma individual.

- **Potência: máx. 70 watts**
- **Energia: máx. 5 joules**
- **Frequência: máx. 60 hertz**

Flexibilidade.

O laser **MegaPulse 70⁺** é ideal para tratamento de pedras e HPB na urologia bem como outras intervenções nas diversas especialidades:

- **Urologia**
- **ORL**
- **Artroscopia**
- **Ginecologia**
- **Dermatologia**
- **Cirurgia Oral**
- **Cirurgia Geral**
- **Cirurgia Plástica**
- **etc.**
- **Ortopedia**
- **Cirurgia Vascular**
- **Cirurgia Torácica**
- **Gastroenterologia**

Praticidade.

O manuseio intuitivo e cômodo permite ao usuário navegar facilmente entre três diferentes modos clinicamente testados.

- **Modo LITHOTRIPSY**
- **Modo SOFT TISSUE**
- **Modo EXPERT**

LITHOTRIPSY

SOFT TISSUE

EXPERT





MEGA Pulse 70+

MEGA Pulse 70+

MEGA *Pulse* 70⁺

Tratamento rápido e eficaz de cálculos

LITOTRIPSIA

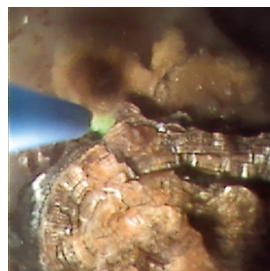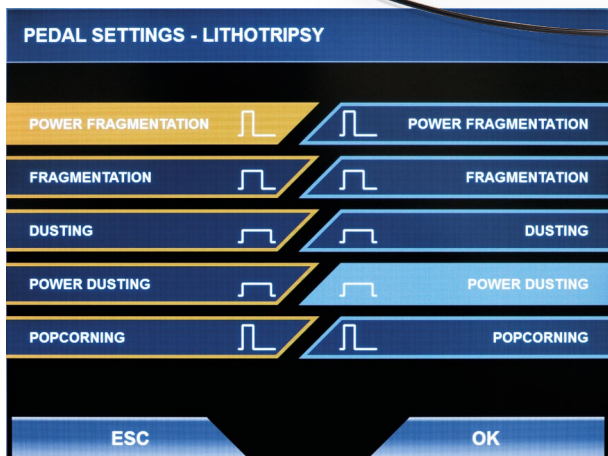

Trabalhar com o laser **MegaPulse 70⁺** no modo LITHOTRIPSY é prático e eficaz. Este modo oferece diferentes predefinições, dependendo da localização e das características dos cálculos.



O usuário pode selecionar configurações para facilitar a fragmentação (Configuração: "Power Fragmentation"), pulverização (configuração: "Dusting", "Power Dusting") ou popcorning (configuração: "Popcorning").

Graças a sua alta frequência e energia, o laser **MegaPulse 70⁺** pode ser usado para tratamento rápido e eficaz dos cálculos, representando assim um sistema de alta velocidade para litotripsia. Utilizado em conjunto com instrumentos endoscópicos, o laser pode efetivamente desfazer os cálculos dentro da bexiga, ureter, uretra ou rim.


MEGA *Pulse* 70⁺

Ablação Precisa

TECIDOS MOLES

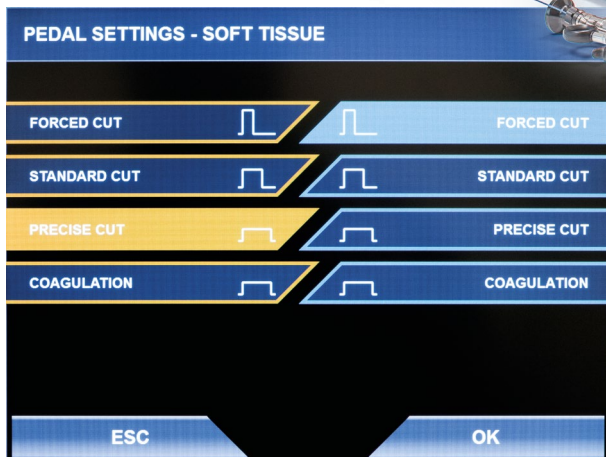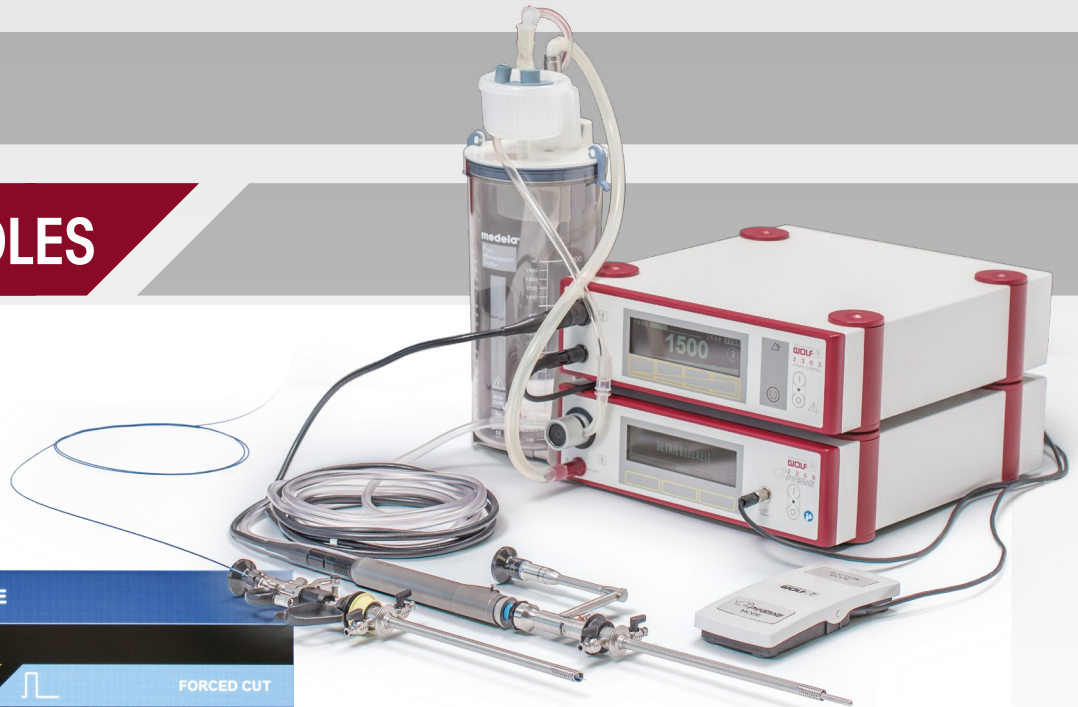

Projetado com foco nos detalhes, o modo SOFT TISSUE estabelece um novo padrão de precisão e velocidade em comparação com os métodos convencionais.

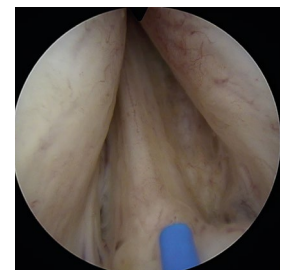

As predefinições garantem uma potência de corte otimizada, dependendo das características do tecido. O usuário pode escolher entre potência, padrão e precisão com as opções "Forced Cut", "Standard Cut" e "Precise Cut" para conseguir a configuração ideal.

As configurações otimizadas de frequência e energia do modo SOFT TISSUE produzem resultados perfeitos com "apenas" 70W - por exemplo, no caso de uma enucleação da próstata a laser Holmium (HoLEP).

O MegaPulse 70⁺ também é adequado para ablação ou ressecção de tumores vesicais, uretrais e ureterais, incisão transuretral da próstata (ITUP), corte de estruturas uretrais, ablação de condilomas, e incisão do colo vesical.



Menu [power] [home] [volume]

Energy 0.7J MegaPulse 70+

Fiber 200µm (P) 0/10

28W DUSTING 50W POWER FRAGMENTATION

Energy 2.5J

Frequency 20Hz LITHOTRIPSY

Standby Ready Status Standby



RICHARD WOLF

MEGA Pulse 70+

MEGA Pulse 70+

Seleção de pulso personalizada

EXPERT

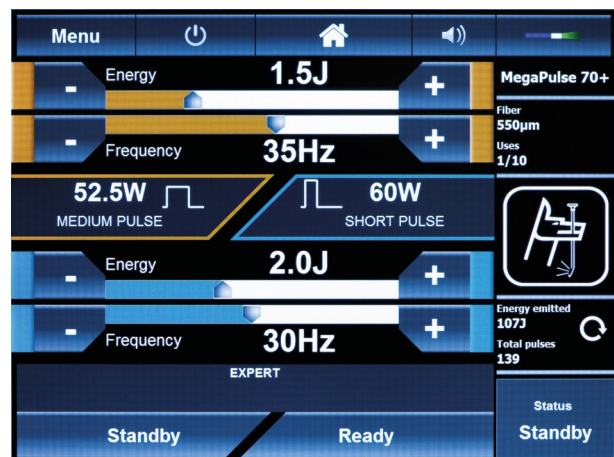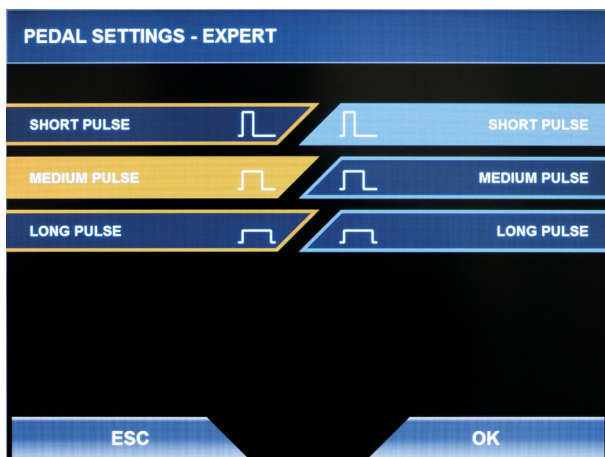

MegaPulse 70⁺ oferece aos usuários experientes a opção de selecionar a largura de pulso em três estágios - curto, médio e longo. Isto cobre um amplo espectro de 50 µs - 1100 µs.

Os valores de energia e frequência podem ser ajustados individualmente.

Dependendo do tipo de tratamento, um pulso curto pode iniciar uma fragmentação eficaz de cálculos, enquanto um pulso longo pode alcançar uma excelente hemostasia durante o tratamento da HPB.

Você encontrará informações adicionais em nosso site:

megapulse70plus.richard-wolf.com



„Este é um laser muito bom.
Basta apertar o pedal e se divertir“!

Dr. med. Michael Straub // Gerente Médico Sênior, Diretor de Endourologia e Tratamento de Pedra Urinária, Hospital Rechts der Isar, Munique

Dentro do modo EXPERT o usuário tem a flexibilidade de ajustar as configurações de acordo com as exigências individuais.

MEGA *Pulse* 70⁺

Potência. Flexibilidade. Praticidade.

MegaPulse 70⁺, com todas as suas características inovadoras, oferece ao cirurgião e sua equipe a máxima versatilidade.



Reconhecimento automático de fibra de laser – mesmo na embalagem

Por meio da tecnologia RFID o laser **MegaPulse 70⁺** pode identificar as fibras de laser dentro da embalagem asséptica - não é necessária uma conexão direta com o laser.

Ao utilizar fibras de laser de uso múltiplo, esta característica permite ao usuário reunir informações importantes antes de desembalar a fibra:

- **Diâmetro da fibra de laser**
Facilita a identificação rápida e segura do diâmetro da fibra, de difícil distinção a olho nu.
- **Histórico de uso**
O sistema reconhece o número de usos de uma fibra de laser e quantas vezes mais a fibra pode ser reutilizada até ser substituída.

A beleza está nos detalhes

Um grande número de pequenos detalhes otimizam o uso do laser **MegaPulse 70+**, aumentando a segurança e também economizando tempo na sala cirúrgica.

■ Fibra de laser Power


A fibra de laser especial Power 200µm atinge potência equivalente a fibras de 272µm apesar de seu diâmetro menor, o que o torna ideal para ureterorenoscopia flexível. Fibras de laser descartáveis e de uso múltiplo também podem ser encomendadas.

■ Pedal duplo

Pedais laranja e azul podem ser usados para mudar facilmente, por exemplo, entre "Power Fragmentation" e "Popcorning". Uma função de espera adicional permite que o usuário ative / desative o laser conforme necessário.

■ Porta automática na entrada da fibra

Uma porta na entrada da fibra impede que partículas de poeira entrem no sistema. A abertura automática da porta, controlada por sensor, facilita o manuseio com uma mão.

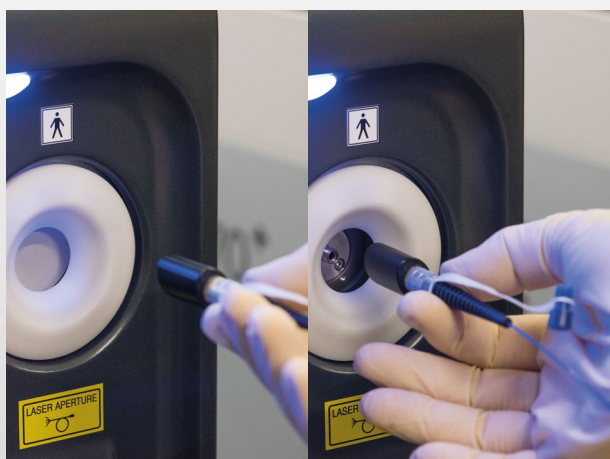

■ Tela de 12" sensível ao toque

O grande visor pode ser girado e inclinado. Ele permite que todas as funções sejam acionadas intuitivamente e que todas as informações importantes sejam exibidas num instante.

■ Blast Shield

O filtro entre a porta de fibra e a fibra de laser evita a contaminação e pode ser facilmente trocado.

■ Feixe-guia verde para orientação da fibra

A função de intermitência opcional oferece ótima orientação, mesmo em caso de sangramento.

■ Resfriamento interno com água

Compressores são utilizados para proporcionar resfriamento e permitir o uso em salas com temperatura entre 10° e 30° C.

Completo

na Litotripsia

LITOTRIPSIA

COBRA vision

COBRA Vision, o único ureterorenoscópio flexível de canal duplo e com sensor é ideal para o tratamento dos cálculos.

BOA vision

BOA vision é um ureterorenoscópio flexível de canal único e com sensor, que, devido seu diâmetro de 8,7 Fr. pode ser usado através de uma bainha de acesso de 9,5 Fr. e, portanto, pode ser usado por todos, particularmente no caso de anatomias difíceis e pequenas.

ENDOCAM Logic 4K

Os 2 endoscópios flexíveis com sensor podem ser usados com a nova **ENDOCAM Logic 4K** e também são compatíveis com a **ENDOCAM Logic HD**.



O pacote inovador da Richard Wolf oferece:

- Endoscópios Flexíveis com sensor
- ENDOCAM Logic 4K
- MegaPulse 70+ Laser

COBRA
VISION

BOA
VISION

ENDOCAM Logic 4K

MEGA*Pulse*⁷⁰⁺

Por favor, entre em contato conosco em caso de dúvidas.

Completo

no tratamento da HPB

TECIDOS MOLES

Ressectoscópio Laser SHARK

A linha de ressectoscópios **SHARK** leva a qualidade, o controle e a segurança a uma nova dimensão. O **SHARK** combina um longo histórico de experiência global de usuários ao longo dos anos. O resultado é um sistema firme e de alta qualidade para uma intervenção eficaz.

Morcelador PIRANHA

A atraumática ponta distal do Morcelador **PIRANHA** tem abertura na parte superior e impede que a membrana mucosa da bexiga seja sugada por engano.

Em combinação com a lâmina **VMax Blade** da Richard Wolf, proporciona um sistema de alta eficiência para morcelação de alta velocidade.

ENDOCAM Logic 4K


A Richard Wolf fornece um impressionante sistema com a **ENDOCAM Logic 4K** para uso em endoscopia. A captura e o processamento da imagem foram otimizados para 4K.

O resultado: imagens claras, nítidas e com cores muito realistas.

O pacote inovador da Richard Wolf oferece:

- Ressectoscópio Laser SHARK
- ENDOCAM Logic 4K
- Laser MegaPulse 70+
- Morcelador PIRANHA

Por favor, entre em contato conosco em caso de dúvidas.

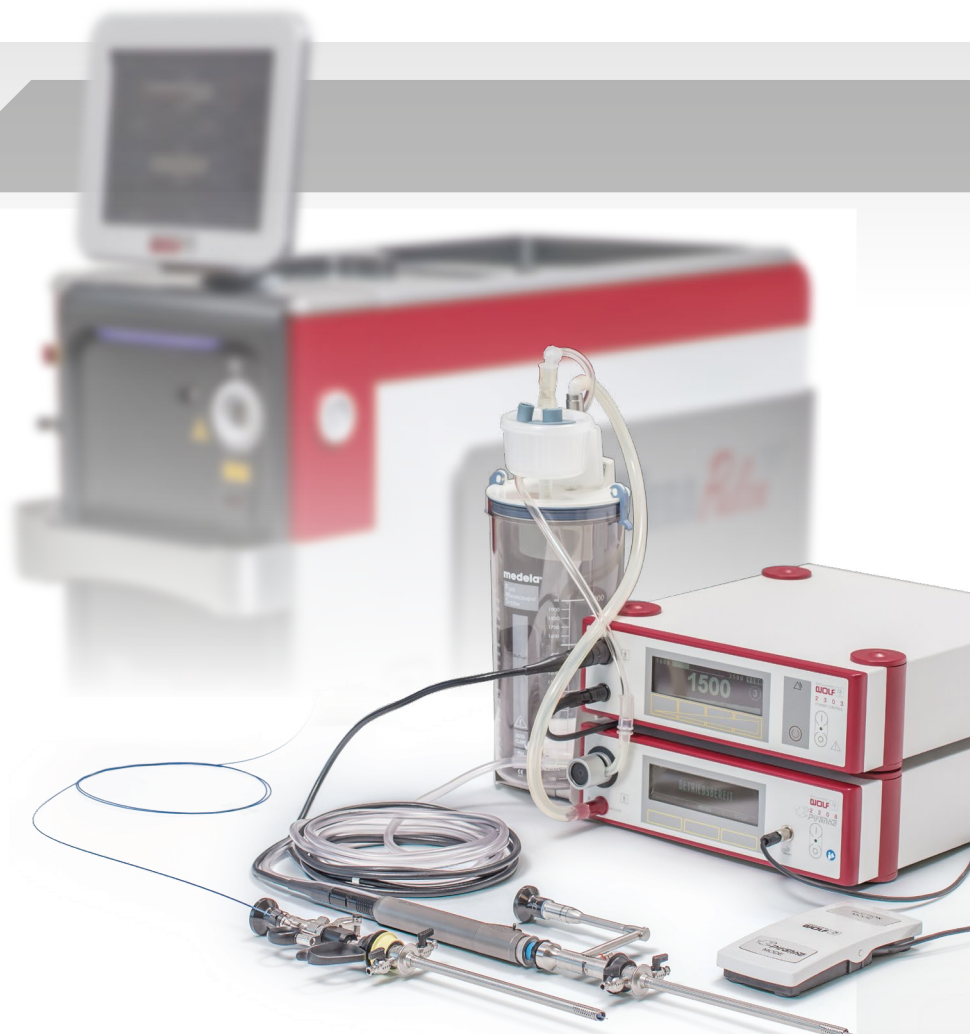

ENDOCAM Logic 4K

MEGA Pulse 70+



Informações para pedido

MegaPulse 70+ Set

Composto por:

MegaPulse 70+ Laser (2286007), 2x óculos de proteção de laser (OBM003603), 1x conjunto de chaves (2286525), 1x plugue de contato da porta (2286520), 2x blast shield (OAM001523), 1x garrafa de abastecimento com conjunto de tubos (IAM000088), 1x pedal duplo (2030232), 1x ferramenta para desencapamento de fibras (2286527), 1x ferramenta - para desencapamento de fibras (2286523), 1x cortador de cerâmica com almofada de silicone (AGM000080), 1x caixa de acessórios para MegaPulse (KBM000103), 1x cabo de energia 3 m (2286230)22860070

Informações Técnicas

Potência	70 Watt
Tipo de Laser	Laser Holmium:YAG (Ho:YAG)
Comprimento de onda	2100 nm (2,1 µm)
Modo de operação	pulsado
Voltagem	200 – 230 V, 50/60 Hz, < 32 A
Energia	200 mJ – 5000 mJ
Frequência / taxa	3 – 60 Hz
Duração do Pulso	ajustável (50 µs – 1100 µs)
Feixe-Guia	verde: 532 nm, < 5 mW, ajustável a contínuo ou intermitente
Temperatura de operação	10°C – 30°C
Temperatura de armazenagem	mín. + 5°C, máx. 40°C
Dimensão (L x A x P)	595 x 1200 x 1074 mm
Peso	200 kg
Display	12" touchscreen

Fibras de Laser

Diâmetro	Descartáveis	Reutilizáveis
200 µm Fibra laser POWER	487502200	87502200
200 µm	487501200	87501200
272 µm	487501272	87501272
365 µm	4875013650	875013650
550 µm	487501550	87501550
800 µm	487501800	87501800
1000 µm	4875011000	875011000

Accessórios

Óculos de proteção de laser	OBM003603
Ferramenta para desencapamento de fibra com diâmetros de 200 – 272µm, autoclavável.	AGM000053
Ferramenta para desencapamento de fibra com diâmetros de 365 – 400µm, autoclavável.	AGM000078
Ferramenta para desencapamento de fibra com diâmetros de 550 – 600µm, autoclavável.	AGM000052
Ferramenta para desencapamento de fibra com diâmetros de 800µm, autoclavável.	AGM000064
Ferramenta para desencapamento de fibra com diâmetros de 0,1 – 0,4 mm	2286527
Ferramenta para desencapamento de fibra com diâmetros de 0,3 – 1,0 mm	2286523
cortador de cerâmica com almofada de silicone	AGM000080
Garrafa de abastecimento com conjunto de tubos	IAM000088
Pedal duplo	2030232
Jogo de chaves	2286525
Plugue de contato da porta	2286520
Blast shield	OAM001523
Peneira de fibra cirúrgica	38001
Cabo de energia 3 m	2286230
Caixa de acessórios para MegaPulse	KBM000103

