


**Flexible Fibre-Urethro-Cystoscope**  
5 mm / 15 Fr.  
Channel 2.5 mm / 7.5 Fr.

**Flexibles Fiber-Urethro-Cystoskop**  
5 mm / 15 Charr.  
Kanal 2,5 mm / 7,5 Charr.

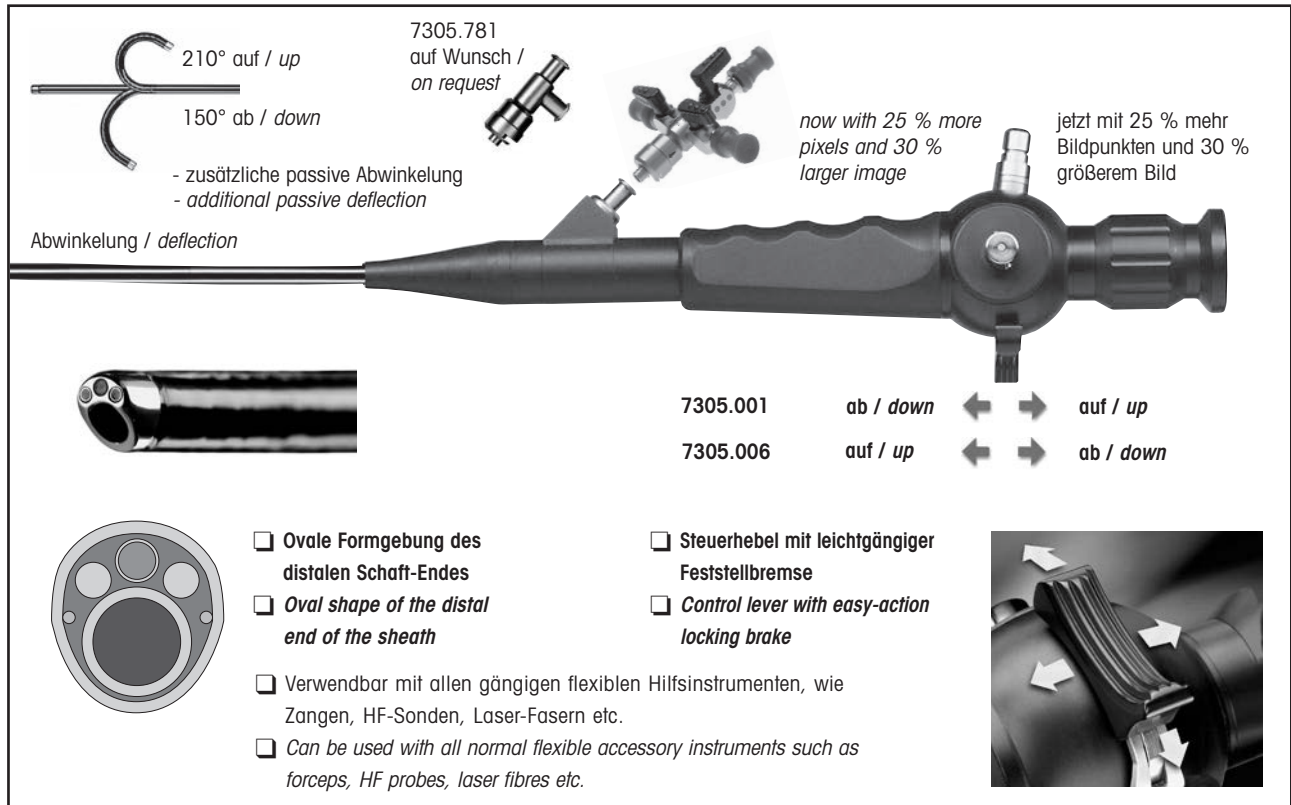

7305.781  
auf Wunsch /  
on request

210° auf / up  
150° ab / down  
- zusätzliche passive Abwinkelung  
- additional passive deflection

Abwinkelung / deflection

now with 25 % more pixels and 30 % larger image  
jetzt mit 25 % mehr Bildpunkten und 30 % größerem Bild

7305.001 ab / down ← → auf / up  
7305.006 auf / up ← → ab / down

- Ovale Formgebung des distalen Schaft-Endes
- Oval shape of the distal end of the sheath
- Steuerhebel mit leichtgängiger Feststellbremse
- Control lever with easy-action locking brake
- Verwendbar mit allen gängigen flexiblen Hilfsinstrumenten, wie Zangen, HF-Sonden, Laser-Fasern etc.
- Can be used with all normal flexible accessory instruments such as forceps, HF probes, laser fibres etc.

6

- Safe and atraumatic passage through the urethra is provided by the oblique distal tip
- Reduced weight and ergonomic design for optimal handling and less strain on the operator
- 0° viewing direction, 120° angle of view
- Immersible and gas sterilisable
- Sichere und atraumatische Passage der Harnröhre durch angeschrägtes distales Schaft-Ende
- Gewichtsreduzierte Bauweise und ergonomisches Design für optimales Handling und ermüdungsfreies Arbeiten
- 0° Blickrichtung, 120° Bildwinkel
- Einleg- und gassterilisierbar

Flexibles Fiber-Urethro-Cystoskop-Set Flexible fibre-urethro-cystoscope set	im Set enthaltenes Fiber-Urethro- Cystoskop included in set Fiber-urethro- cystoscope	Außen-Durchmesser Outer diameter	Sondenkanal Instrument channel	Nutzlänge Working length	Set
bestehend aus: Fiber-Urethro-Cystoskop, Ansatz mit Einführungshahn (7305.782), Dichtigkeitstester (163.903), Gassteril-Ventil (163.904), Einmal-Reinigungsbürste (7990002), Koffer	7305.001	5 mm 15 Charr. / Fr.	2.5 mm 7.5 Charr. / Fr.	400 mm	Steuerhebel nach distal - Abwinkelung nach unten Forward movement of the control lever provides downward movement of the tip <b>730500111</b>
consisting of: Fiber-urethro-cystoscope, instrument port (7305.782), leak tester (163.903), gas sterilisation valve (163.904), disposable cleaning brush (7990002), case	7305.006				Steuerhebel nach distal - Abwinkelung nach oben Forward movement of the control lever provides upward movement of the tip <b>730500611</b>

hierzu / also: <b>Fiber Lichtleiter Set</b> , Ø 2,5 mm bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509) <b>Fiber light cable set</b> , Ø 2.5 mm consisting of: Fiber light cable (80662523), adapter projector side (8095.07) and adapter endoscope side (809509)				2.3 m lang / long	<b>806625231</b>
---	--	--	--	----------------------	------------------

Hilfsinstrumente siehe Rückseite / Accessory instruments see overleaf

## Accessory Instruments

for flexible fibre-urethro-cystoscope


<b>MegaPulse Desktop 30+ Set</b> .....	22860010
<b>MegaPulse Tower 30+ Set</b> .....	22860060
<b>ENDOCAM Logic HD Controller Set</b> can also be used with Pendual Camera Head ENDOCAM <b>Logic HD</b> .....	55251011
<b>Medical LCD Monitor 27"</b> for pin-sharp endo images .....	LMD-2765NB
optional:	
<b>Monitor Stand</b> .....	5370.0190
<b>Suction Pump Set</b> .....	2207.0011
<b>PRO-CART</b> .....	32113.003

## Hilfsinstrumente

zum flexiblen Fiber-Urethro-Cystoskop

<b>MegaPulse Desktop 30+ Set</b> .....	22860010
<b>MegaPulse Tower 30+ Set</b> .....	22860060
<b>ENDOCAM Logic HD Controller Set</b> mit Pendual Kamerakopf ENDOCAM <b>Logic HD</b> verwendbar .....	55251011
<b>Medizinischer LCD-Monitor 27"</b> für gestochen scharfe Endobilder .....	LMD-2765NB
optional:	
<b>Monitor-Standfuß</b> .....	5370.0190
<b>Suction Pump Set</b> .....	2207.0011
<b>PRO-CART</b> .....	32113.003

6

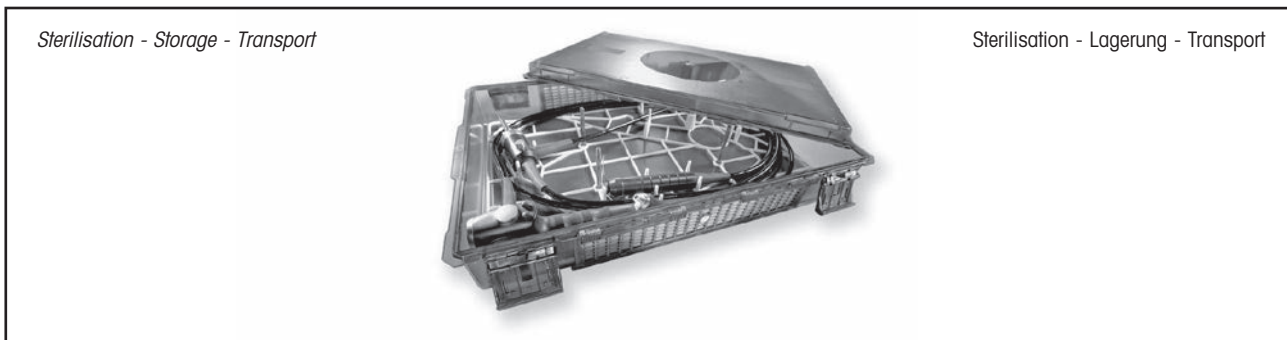

**Sterisafe DURO A3-Set,**  
for plasma sterilization consisting of:  
Sterisafe DURO A3 (382031003),  
Toolsafe Lattice base (382031101),  
Disposable filter for H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>  
(pack of 100, 382031401) .....382032000

**Sterisafe DURO A3-Set,**  
for EO (ethylene oxide) and FA (formaldehyde) consisting of:  
Sterisafe DURO A3 (382031003),  
Toolsafe Lattice base (382031101),  
Disposable filter for EO and FA  
(pack of 100, 382031501) .....382032100

Accessories:  
**Disposable filter, pack of 100,**  
for H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> .....382031401  
for EO and FA .....382031501  
**Seal of approval label, pack of 500,**  
for H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> .....382031220  
**Label holder, universal** .....382031203  
**Lead-wire seal, pack of 100** .....382031202

**Technical information:**  
Outer dimensions (L x W x H): 450 x 292 x 87 mm  
Inside dimensions (L x W x H): 420 x 265 x 75 mm

**Sterisafe DURO A3-Set,**  
für Plasma-Sterilisation bestehend aus:  
Sterisafe DURO A3 (382031003),  
Toolsafe Gitterunterlage (382031101),  
Einwegfilter für H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>  
(VE=100 St., 382031401) .....382032000

**Sterisafe DURO A3-Set,**  
für EO und FA bestehend aus:  
Sterisafe DURO A3 (382031003),  
Toolsafe Gitterunterlage (382031101),  
Einwegfilter für EO und FA  
(VE=100 St., 382031501) .....382032100

Zubehör:  
**Einwegfilter, VE=100 St.,**  
für H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> .....382031401  
für EO und FA .....382031501  
**Siegeletikett, VE=500 St.,**  
für H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> .....382031220  
**Etikettenhalter, universal** .....382031203  
**Sicherungsplombe, VE=100 St.** .....382031202







**Technische Informationen:**  
Außenmaße (L x B x H): 450 x 292 x 87 mm  
Innenmaße (L x B x H): 420 x 265 x 75 mm

## Accessory Instruments

for flexible fibre-urethro-cystoscope

## Hilfsinstrumente

zum flexiblen Fiber-Urethro-Cystoskop

	Außen - Ø Outer - Ø	NL WL	Typen Types
<b>Probe-Exzisionszange</b> <b>Biopsy forceps</b> Verlängerte Maulteile vergrößern das Biopstat <i>Extra long jaws to obtain a larger specimen</i> 	1.6 mm 5 Charr. / Fr.	550 mm	<b>829.051</b>
<b>Mauszahn-Fasszange, sicheres und effektives Greifen durch Mauszahngeometrie</b> <b>Mouse-tooth grasping forceps, Safe and effective grasping with mouse-tooth geometry</b> 	1.6 mm 5 Charr. / Fr.	550 mm	<b>8735.685</b>
	2.0 mm 6.5 Charr. / Fr.	550 mm	<b>8736.685</b>
<b>Einmalgebrauch-Laserfaser</b> für Blasensteine mit MegaPulse 30+ Laser, einzeln steril verpackt <b>Disposable laser fibres</b> for bladder stones with MegaPulse 30+ laser, packed singly, sterile	365 µm		<b>4875013650</b>
	550 µm		<b>487501550</b>
<b>Mehrfachgebrauch-Laserfaser</b> für Blasensteine mit MegaPulse 30+ Laser, einzeln steril verpackt <b>Reusable laser fibres</b> for bladder stones with MegaPulse 30+ laser, packed singly, sterile	365 µm		<b>875013650</b>
	550 µm		<b>87501550</b>
<b>Ansatz mit 2 Luer-Anschlüssen, Schnellverschluss</b> <b>Attachment with 2 Luer connectors, quick-lock mechanism</b> 			<b>7305.781</b>
hierzu / also: <b>Luer Verschlusskappe</b> <b>Luer sealing cap</b> 			<b>15023205</b>
zum Einführen von Hilfsinstrumenten von 1 – 6 Charr. <b>Steriles Universal Dichtventil</b> (VE = 5 St.) <i>for inserting accessory instruments of 1 – 6 Fr.</i> <b>Sterile universal sealing valve</b> (pack of 5) 			<b>4712348</b>
<b>Tuohy-Borst-Adapter, steril</b> mit Zuspritzteil, mit männlichem Luer-Lock Ansatz (VE = 20 Stück) <b>Tuohy-Borst Adapter, sterile</b> <i>with injection port, with male Luer-lock fitting</i> (Pack of 20) 			<b>413910</b>