

A Solução Bipolar



ERAGON bipolar

Sistema de Instrumento Bipolar
modular - ergonômico - seguro

Sistema de Instrumento Bipolar: modular - ergonômico - seguro

ERAGON bipolar - o sistema de instrumento modular reutilizável para laparoscopia.

O conjunto de instrumentos inovador e de alta qualidade já provou seu sucesso muitas vezes. Como resultado da estrutura de três partes, a montagem e desmontagem simples e intuitiva com base na tecnologia "Click-it", o sistema atende a todas as exigências para manuseio fácil e excelentes condições de reprocessamento.

Simplesmente ergonômico

A manopla ERAGON define o conjunto de instrumentos com um grande ergonomia. Levando em conta as diversas áreas de aplicação e as potencias posições da mão, assim como os tamanhos individuais da mão e dos dedos, o foco foi especificamente na ergonomia da manopla. Superfícies de contato foram generosamente projetadas para acomodar diferentes partes da anatomia da mão e evitar pontos de pressão e dedos dormentes. O resultado é um maior conforto no trabalho, livre de fadiga.

Qualidade superior

Materiais de alta qualidade e processamento preciso formam a plataforma para um conjunto de instrumentos de vida longa e excelente custo-benefício.

O fechamento virtualmente em paralelo das mandíbulas foi desenvolvido pelo design refinado dos instrumentos. Isso permite uma aderência uniforme e sensível e uma dissecação segura.





A segurança é a maior prioridade

O mecanismo de junção foi realocado no interior do instrumento como resultado do design inteligente para evitar que o tecido seja prensado de forma inadvertida pela projeção das peças do sistema.

O trabalho totalmente seguro continua a ser possível como resultado de um isolamento completo, incluindo a área do mecanismo conjunto. Portanto, a coagulação só ocorre quando necessário.







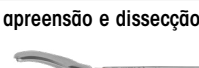
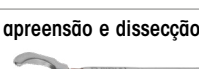
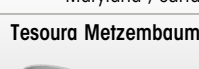
A corrente é conduzida dentro do tubo da haste em um ambiente protegido e isso significa que não é necessário nenhum isolamento do tubo da haste. Quaisquer riscos de segurança resultantes de danos ao tubo da haste podem, portanto, ser excluídos com antecedência.

Incrivelmente versátil

O conjunto do instrumento é aperfeiçoado com uma seleção perfeita de diferentes versões de mandíbulas em diferentes comprimentos de trabalho para uma versátil série de aplicações.



O sistema

Mandíbula		Tubo da haste, ø 5.5 mm		Manopla	Instrumento Completo • Mandíbula • Tubo da Haste • Manopla
		CT 330 mm	CT 460 mm	giratório	
Tipo		83930921	82340024	839300102	Type
 Pinça de apreensão e dissecação	83930031	•		•	839300312
	839400310		•	•	839400312
 Pinça de apreensão e dissecação	83930032	•		•	839300322
	"Dissector Maryland" 839400320		•	•	839400322
 Pinça de apreensão e dissecação	83930033	•		•	839300332
	"Dolphin" 839400330		•	•	839400332
 Pinça de apreensão fenestrada	83930034	•		•	839300342
	839400340		•	•	839400342
 Pinça de dissecação	83930035	•		•	839300352
	"Hasskamp" 839400350		•	•	839400352
 Pinça de esterilização "Hasskamp" 83930036	•		•	839300362	
 Pinça de apreensão e dissecação "Munster" 83930037	•		•	839300372	
 Pinça de apreensão e dissecação	83930038	•		•	839300382
	"Maryland", curta 839400380		•	•	839400382
 Tesoura Metzembaur	83930041	•		•	839300412
	839400410		•	•	839400412

