

All-in-one design
comes in pairs



Hystéroscope compact

Design mince sous emballage compact
en diamètre 5,0 mm et 3,9 mm

Hystéroscope compact

Design mince sous emballage compact
en diamètre 5,0 mm et 3,9 mm

Le design mince tout en un de nos deux hystérosopes compacts est non seulement beau mais aussi très pratique.

Les avantages extérieurs tels que le maniement ergonomique, le traitement encore plus facile et la longue durée de vie vont de pair avec les valeurs intérieures telles que l'image brillante, l'irrigation véritablement continue et un grand canal de travail droit.

Les deux tailles de l'hystéroscope compact de Richard Wolf sont à même de maîtriser tout défi :

All-in-one design comes in pairs

Bien protégé

La conception compacte et robuste assure une protection durable et fiable aux optiques PANOVIEW PLUS haute qualité. Par rapport aux instruments modulables, leur durée de vie est nettement plus longue et la qualité des images est durablement meilleure.

Compact à l'extérieur – grand à l'intérieur

Malgré leur diamètre extérieur relativement petit, les deux instruments présentent un canal de travail de grande lumière de 5 Ch. qui permet l'utilisation de plusieurs instruments auxiliaires.



3,9 mm



5,0 mm




 3,9 mm

Une mesure référence

Grâce au diamètre extérieur sensiblement réduit, l'hystéroscope compact 3,9 mm se prête notamment aux patientes consultant pour stérilité et fertilité, son emploi étant nettement moins traumatisant.

Débit véritablement continu

Les deux canaux séparés d'arrivée et d'évacuation sont le garant des meilleures conditions de visibilité à tout moment de l'intervention - même lorsque l'instrument auxiliaire est introduit.

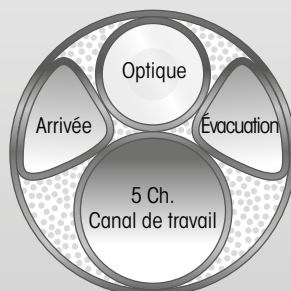

Hystéroscope compact

Design mince sous emballage compact en diamètre 5,0 mm et 3,9 mm

Droit au but

Le canal de travail 5 Ch. droit contribue de manière déterminante à protéger vos instruments auxiliaires tout en assurant - en liaison avec notre poignée ergonomique - une position de travail confortable et un maniement simple.



Sous réserve de modifications. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez toujours prendre connaissance des informations concernant les produits. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre interlocuteur ou directement Richard Wolf GmbH.

Hystéroscope compact	8986.401	89864021
Diamètre extérieur	5,0 mm rond	3,9 mm rond
Canal de travail	5,0 Ch.	5,0 Ch.
Axe de vision	20°	30°
Longueur totale	348 mm	352 mm
Longueur utile	217 mm	217 mm
Poids	158 g	123 g

Hystéroscope compact 5,0 mm
avec irrigation continue, axe de vision 20°, canal de travail droit pour instruments jusqu'à 5 Ch. 8986.401

Hystéroscope compact 3,9 mm
avec irrigation continue, axe de vision 30°, canal de travail droit pour instruments jusqu'à 5 Ch. 89864021

Accessoires	
Poignée ergonomique	8986.251
Pince à biopsie (Cuiller)	8642.6002
Pince à préhension à dents de brochet	8642.6502
Ciseaux miniatures	8642.6812
Pince emporte-pièce à biopsie	8642.6312
Panier-tamis pour hystéroscope	38009
Kit de câble fibre optique, longueur 2,3 m, ø du faisceau de fibres 2,5 mm	806625231
Capuchon en caoutchouc RIWO, rouge orangé, UE = 10 pcs.	88.01
Boisseau de robinet complet, UE = 5 pcs.	896.0002