

Präzise und  
punktuelle Abtragung



## Endobronchiale Shaver Blades

zur schonend sicheren Geweberesektion  
und Schleimabtragung




# Endobronchiale Shaver Blades

Präzise und punktuell – schonend und sicher abtragen

Das Portfolio der Richard Wolf Instrumente zur starren Bronchoskopie wird um diese hoch innovativen Shaver Blades zur Geweberesektion erweitert.

Exophytische Tumorentfernungen – ob maligne oder benigne –, Stenosen oder Granulations-Gewebe können mit den neuen endobronchialen Shaver Blades mühelos abgetragen werden. Durch die oszillierende innere Schneidkante und dem gleichzeitig an die Absaugung angeschlossenen Handstück kann besonders schonend und punktgenau reseziert werden. Entstehende Blutungen werden im bimanuellen Einsatz mit dem bipolaren Koagulationssaugrohr gestoppt.

Überzeugen Sie sich selbst. Moderne und innovative Bronchoskopie hat einen Namen – Richard Wolf.

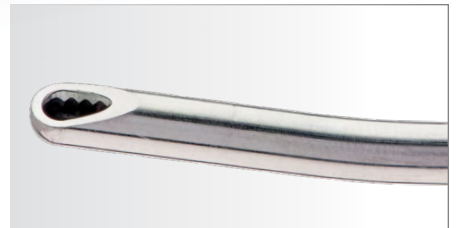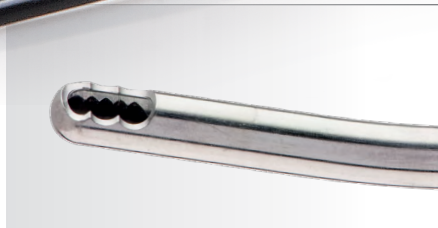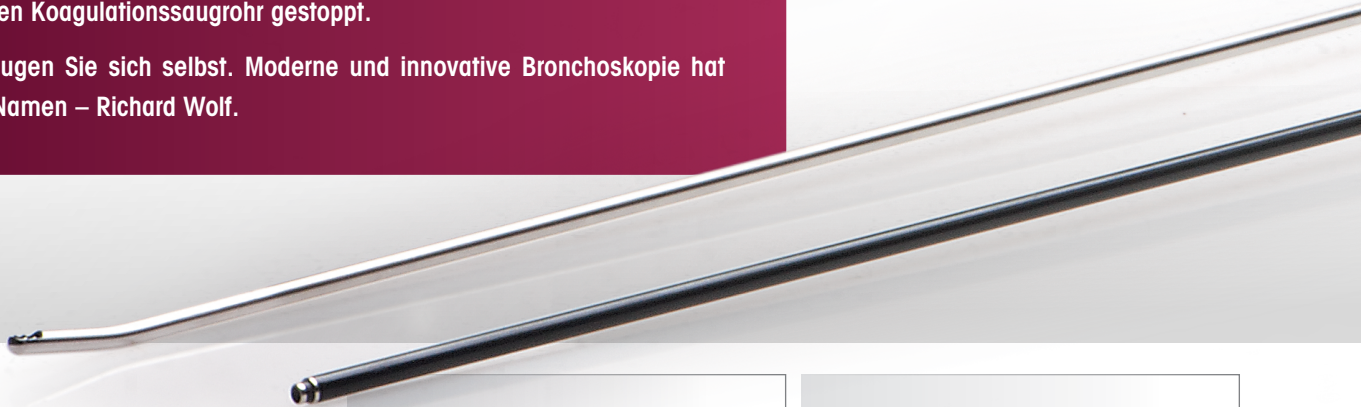

## Aggressives Blade

mit doppelt gezahntem Schneidfenster, distal aufgebogen

Durch die Verzahnung am Innen- und am Außenschaff bietet dieses Blade optimale Abtragungsmöglichkeiten. Besonders großflächige Areale können hiermit rasch reseziert werden.

## Nicht aggressives Blade


mit glattem Schneidfenster, distal aufgebogen

Das nicht verzahnte, glatte Schneidfenster macht dieses Blade besonders geeignet für schonende, filigrane und punktgenaue Anwendungen.

Beide Blades sind um ca. 15° aufgebogen. Dies gewährleistet einen optimalen Blickwinkel auf das Arbeitsende im endoskopischen Bild.



Die Shaver Blades werden als Einmalartikel unsteril angeboten. Bestens eignet sich der Einsatz dieser Artikel mit dem Texas Bronchoskop

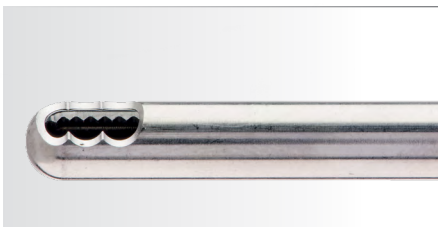

### Großes aggressives Blade

mit doppelt gezahntem Schneidfenster, gerade

Das gerade, großlumige aggressive Blade eignet sich bestens zur Rekanalisation des Bronchialsystems.



### Sekret Remover








Eine absolute Weltneuheit ist der Remover. Mit diesem können über die Sogwirkung der angeschlossenen Absaugung sowie über eine Spirale Blutkoagel oder zähes Sekret angesaugt und abgetragen werden. Der Remover ist absolut atraumatisch und schonend für das Gewebe.



### Bipolarer Sauger

Der bipolare Sauger bietet die Möglichkeit, während des Absaugens direkt Blutungen zu stoppen und gezielt Sekret abzusaugen.
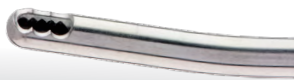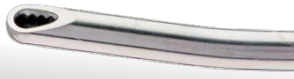
# Bestelldaten

|   |   |
|---|---|
|    | <p><b>POWERDRIVE GENERATOR ART1</b> ..... 2304001</p>   |
|   | <p><b>Netzkabel, 3,0 m</b> ..... 20950.0301</p> <p><b>Zweipedalfußschalter</b> ..... 2304.901</p>   |
|    | <p><b>Micro Stick S1 Shaver Handstück</b><br/>Kleiner Ø (16 mm) gerader Motorhandgriff für Rotationsmesser bzw.-Fräser,<br/>Bedienung mit einer An/Aus Taste, sterilisierbar, max. Drehzahl 3000 rpm ..... 89951.0001</p> |
|   | <p><b>Curved Aggressive Tracheal Resector</b><br/>AD = 4,5 mm, AL = 460 mm ..... 825620446</p>  |
|    | <p><b>Curved Tracheal Resector</b><br/>AD = 4,5 mm, AL = 460 mm ..... 825610446</p>   |
|    | <p><b>Aggressive Tracheal Resector</b><br/>AD = 5,5 mm, AL = 460 mm ..... 825630546</p>   |
|    | <p><b>Tracheal Secretion Remover</b><br/>AD = 5,5 mm, AL = 460 mm ..... 825640546</p>   |
|    | <p><b>Bipolar-Sauger</b><br/>zur Bronchoskopie und Esophagoskopie, gerade,<br/>AD = 5,2 mm, NL = 460 mm ..... 844202110</p>   |
| <p><b>Optik Element</b><br/>Endoskop mit Faser-Bildleiter, Modell TEXAS, BR 12°,<br/>mit integrierter Linsenspülung und Schutzschaff ..... 82510.1400</p>         | <p><b>Tracheoskop-Tubus Gr. 8</b><br/>für Optikelement 82510.1400, Innendurchmesser mit Optikelement ID = 8 mm,<br/>AD = 12 mm, NL = 295,5 mm ..... 825210830</p>   |
| <p><b>Tracheoskop-Tubus Gr. 10</b><br/>für Optikelement 82510.1400, Innendurchmesser mit Optikelement ID = 10 mm,<br/>AD = 14 mm, NL = 300 mm ..... 825211030</p> |   |