

Enukleation einfach anders

Bipolare Enukleationselektrode

zur Enukleation der Prostata

Enukleation einfach anders

Die wirtschaftliche Systemlösung




„Die endoskopische Enukleation der Prostata nimmt einen immer größeren Stellenwert in der täglichen Praxis ein und wird in immer mehr Kliniken als Standardverfahren eingesetzt.

Da jede urologische Abteilung ein HF-Gerät besitzt, liegt die Möglichkeit nahe, mit dem gleichen Instrumentarium, ohne größere Investitionen, direkt von der Resektion auf die Enukleation der Prostata zu schwenken.

Nun kommt die hier vorgestellte bipolare Enukleationselektrode von Richard Wolf ins Spiel: Zusammen mit den ausgereiften SHARK-Resektoskopen und dem hoch-effizienten PIRANHA-Morcellator bietet sie im System eine kostengünstige Alternative zur Laserenukleation, aber selbstverständlich auch zu den Standardverfahren wie der TUR.“

Prof. Dr. med. Thorsten Bach (FEBU) // Chefarzt, Chairman EAU Patient Information Projekt, Urologisches Zentrum Hamburg, Asklepios Klinikum Harburg

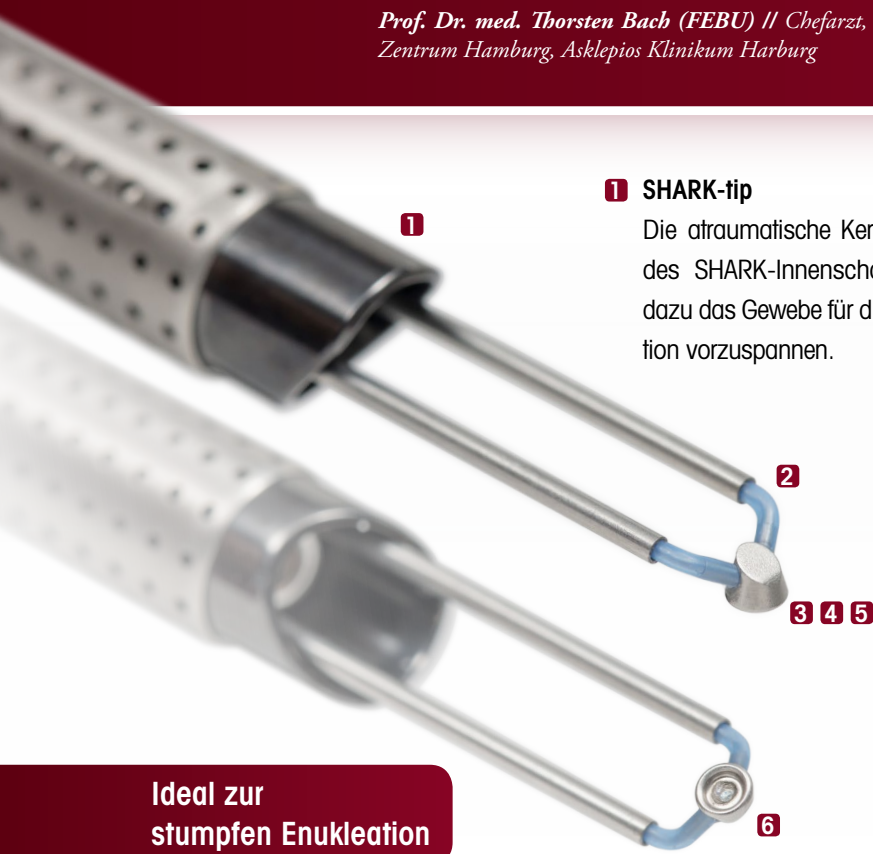

1 SHARK-tip

Die atraumatische Keramikspitze des SHARK-Innenschafes dient dazu das Gewebe für die Enukleation vorzuspannen.

2 Proximale Zuleitungsdrähte

ermöglichen bei hoher mechanischer Stabilität eine gute Übersicht im OP-Situs.

3 Kleiner Elektrodenkopf

für deutlich präziseres und feineres Arbeiten insbesondere bei der apikalen Dissektion.

4 Einmaliges Design, vielfältige Anwendungen

ermöglicht Enukleation, Koagulation und Vaporisation.

5 Distal keilförmige Auflagefläche

ermöglicht stumpfe, rein mechanische Enukleation und unter Einsatz von HF-Strom auch effektive Vaporisation und Inzision.

Ideal zur stumpfen Enukleation

6 Große "Donut"-förmige Grundfläche

Die spezielle Formgebung ermöglicht eine effektive sowie blutungsarme Vaporisation und Koagulation bei minimiertem Eindringen von thermischer Energie in das umliegende Gewebe.

Einfach wirtschaftlich: Das System

Die Enukleationselektrode ist perfekt auf unseren effizienten PIRANHA-Morcellator abgestimmt: Die wirtschaftliche Systemlösung für die Enukleation der Prostata.

■ Sicher im System

Die extrem atraumatische distale Morcellatorspitze verhindert ungewolltes Ansaugen von Blasenschleimhaut

■ Hocheffizient mit "Vmax Blades"

High-Speed-Morcellation durch vergrößerte Absaug- und Schneidefläche sowie optimierte Schneidegeometrie

■ Schnell und einfach

Beim Umstieg von bipolarer Enukleation zur Morcellation ist kein Schaftwechsel notwendig





Präzision mit Biss

Sowohl die bipolare Enukleationselektrode wie auch der PIRANHA-Morcellator erreichen, kombiniert mit unseren bewährten SHARK-Resektoskopen, außerordentliche Präzision.

 Piranha

Bipolare Enukleationselektrode

zur Enukleation der Prostata


Bipolare Enukleations-Elektrode

für SHARK-Resektoskope, 4 mm
Optik, Blickrichtung 30°, 12°, ein-
zeln steril verpackt (VE = 3 St.)

für Schaft:

ab 22 Charr. **46400223**

ab 24 Charr. **46400243**

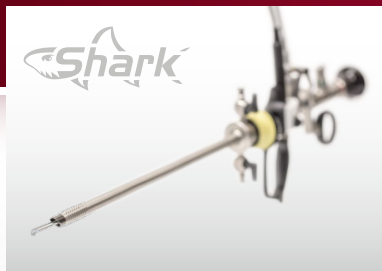

Bipolares "SHARK" Dauerspül-Resektoskop 24/26 Charr., 30°

Außenschaft **8675426**

Innenschaft **8675324**

Obturator **8673024**


Arbeitselement **8680.205**

Optik **8654.422**

**Fiber Lichtleiter 2,5 mm,
3,0 m komplett** **806625301**

Hierbei handelt es sich um eine emp-
fohlene Instrumenten-Kombination.

Darüber hinaus bietet Richard Wolf
ein umfangreiches Programm an
SHARK-Resektoskopen für viele
Anwendungszwecke: **Fragen Sie uns.**

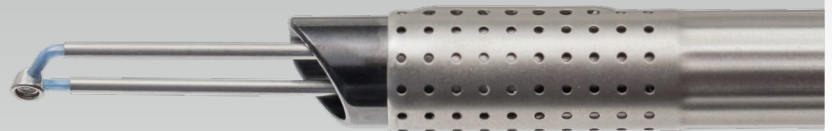

"PIRANHA" Morcellations-System

Rotations-Morcellator

zum Einmalgebrauch (VE = 3 Stück),

Ø 4,75 mm,

NL 335 mm **49700113**

Power Stick M 4

Motorhandgriff **8564.122**

Power Control 2303

Motor Control Unit **2303.001**

Netzkabel **2440.03**

Saugpumpe 2208

zur Aspiration von Spülflüssigkeit
und abgetrennten

Gewebeteilchen **2208.0010**

Einmalgebrauch-

Schlauch-Set,

(VE = 10 Stück) **41702208**

Einweg-Gewebe-

Auffangbehälter,

(VE = 10 Stück) **2208120**



Visualisierung

ENDOCAM Logic 4K Kamera Controller komplett

bestehend aus:

ENDOCAM Logic 4K Controller
(5525301), Handfernbedienung
(5525401), USB Flash Speicher
32GB (72321829), HDMI / HDMI-
Kabel verriegelbar 3,0 m (103847),
Netzkabel (2440.03) ... **55253011**

PENDUAL blue HD Kamerakopf

Abwinkelbares Gehäuse

für zwei Betriebsmodi:

1: Pendelkamerakopf

2: gerader Kamerakopf

integriertes Objektiv f = 17 mm

Kabellänge: 3 m **5525833**

ENDOLIGHT LED 2.2 komplett

bestehend aus:

ENDOLIGHT LED 2.2 (5164001)

und Netzkabel

(2440.03) **51640011**

