

All-in-one design  
comes in pairs



## **Kompakt** Hysteroskope

Schlankes Design kompakt verpackt  
in 5,0 mm und 3,9 mm Durchmesser

# Kompakt Hysteroskope

Schlankes Design kompakt verpackt  
in 5,0 mm und 3,9 mm Durchmesser

Das schlanke all-in-one Design unserer beiden Kompakt-Hysteroskope sieht nicht nur gut aus, sondern bietet auch praktische Vorteile.

Gutes Handling, erleichterte Aufbereitung und lange Lebensdauer treffen auf innere Werte wie das brillante Bild, "echte" Dauerspülung und einen großen, geraden Arbeitskanal.

In gleich zwei Größen werden die Kompakt-Hysteroskope von Richard Wolf jeder Herausforderung gerecht:

**All-in-one design comes in pairs**

## Gut geschützt

Die stabile Kompaktbauweise schützt die hochwertigen PANOVIEW PLUS Optiken zuverlässig und dauerhaft. Dies erhöht die Haltbarkeit gegenüber zerlegbaren Instrumenten deutlich und sorgt für eine nachhaltig optimale Bildqualität.

## Außen kompakt – innen groß

Trotz vergleichsweise schlanker Außendurchmesser bieten beide Instrumente einen mit 5 Charr. großlumigen Arbeitskanal, der den Einsatz verschiedenster Hilfsinstrumente ermöglicht.



3,9 mm



5,0 mm




**3,9 mm**

### Ein Maß wird zum Maßstab

Mit seinem deutlich reduzierten Außendurchmesser überzeugt das 3,9 mm Kompakt-Hysteroskop speziell bei Fertilitäts- und Sterilitäts-Patientinnen durch die deutlich geringere Traumatisierung.

### True Continuous Flow

Zwei separate Zu- und Ablaufkanäle sorgen jederzeit zuverlässig für beste Sichtverhältnisse – auch bei eingeführtem Hilfsinstrument.

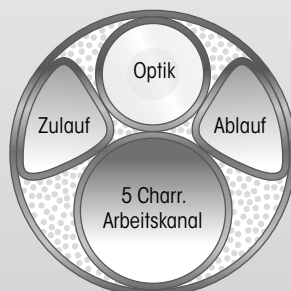

# Kompakt Hysteroskope

Schlankes Design kompakt verpackt  
in 5,0 mm und 3,9 mm Durchmesser

## Einfach gradlinig

Der gerade 5 Charr. Arbeitskanal trägt maßgeblich zur Schonung Ihrer Hilfsinstrumente bei und sorgt in Kombination mit unserem ergonomischen Handgriff für eine komfortable Arbeitshaltung und einfaches Handling.



Kompakt-Hysteroskop	8986.401	89864021
Außendurchmesser	5,0 mm rund	3,9 mm rund
Arbeitskanal	5,0 Charr.	5,0 Charr.
Blickrichtung	20°	30°
Gesamtlänge	348 mm	352 mm
Nutzlänge	217 mm	217 mm
Gewicht	158 g	123 g

Kompakt-Hysteroskop 5,0 mm
mit Dauerspülung, Blickrichtung 20°, gerader Arbeitskanal, für Instrumente bis 5 Charr. .... 8986.401

Kompakt-Hysteroskop 3,9 mm
mit Dauerspülung, Blickrichtung 30°, gerader Arbeitskanal, für Instrumente bis 5 Charr. .... 89864021

Zubehör	
Ergonomischer Handgriff .....	8986.251
PE-Zange (Löffel) .....	8642.6002
Fasszange mit Hechtmaul .....	8642.6502
Mikroschere .....	8642.6812
Biopsie-Stanze .....	8642.6312
Siebkorb für Hysteroskop.....	38009
Fiber-Lichtleiter-Set, 2,3 m lang, Faserbündel-ø 2,5 mm .....	806625231
Gummikappe "RIWO", rotorange, VE = 10 St. ....	88.01
Hahnküken kpl., VE = 5 St. ....	896.0002

Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass nicht jedes Produkt in allen Ländern verfügbar ist. Bitte nehmen Sie die produktbegleitenden Informationen stets zur Kenntnis. Für genaue Informationen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder direkt an die Richard Wolf GmbH.

E635de150323