


Die etwas anderen Stanzen

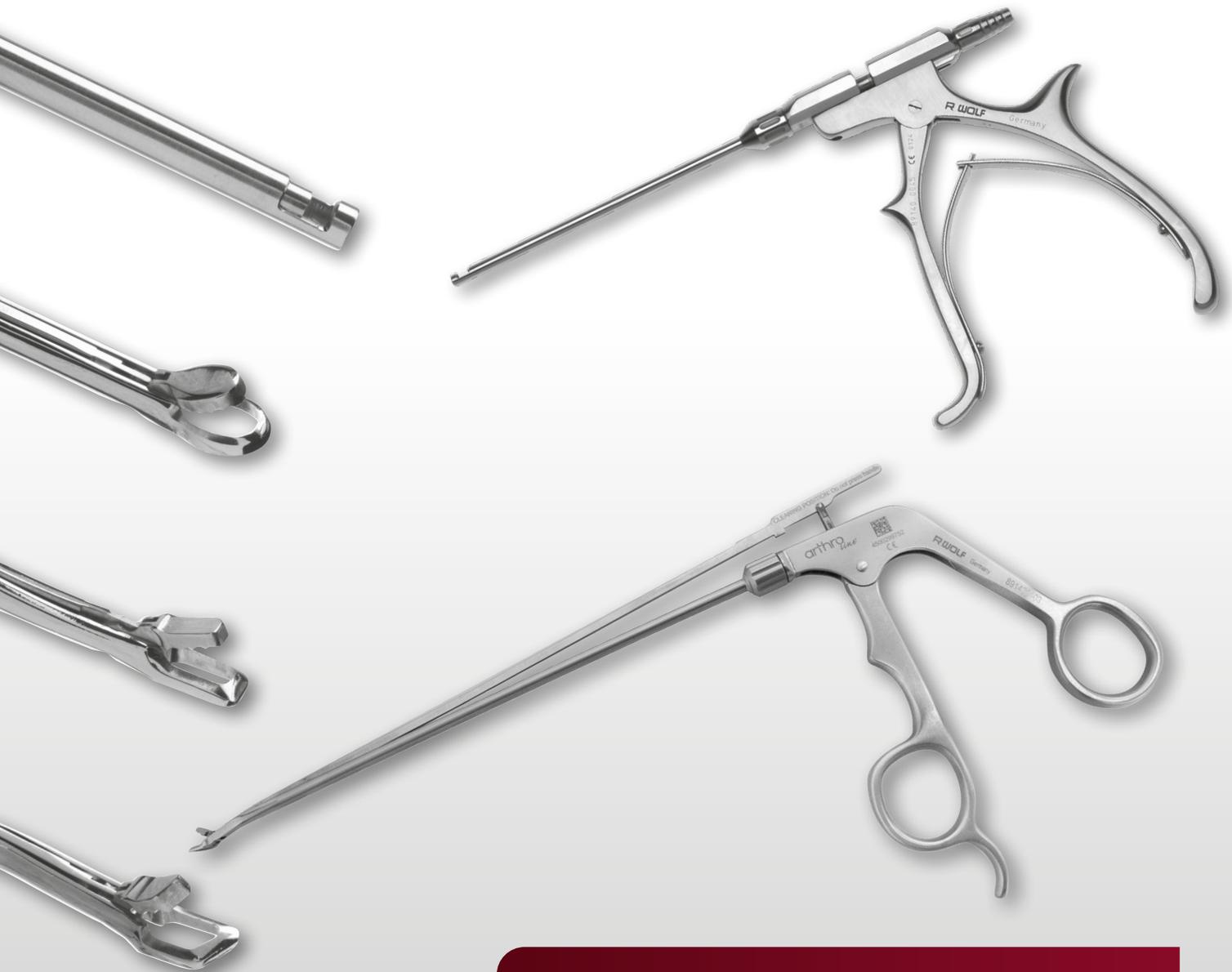

arthro
line

Das Premium-Segment für höchste Ansprüche

arthro line

Das Premium-Segment für höchste Ansprüche

ARTHROline-Stanzen:

- Perfekter Schnitt
- Geringer Kraftaufwand
- Ergonomische Griffform
- Zerlegbar



Die neueste Generation der bewährten **ARTHROline**-Stanzen wurde hinsichtlich einer optimierten Aufbereitung überarbeitet und erfüllt somit höchste hygienische Anforderungen.

Dank einer speziellen Mechanik kann die Schubstange zur Aufbereitung aufgeklappt werden, sodass eine vollständige Umspülung gewährleistet ist und Rückstände sicher entfernt werden. Dabei wird während der Reinigung die Schubstange mittels Federkraft in der geöffneten Position gehalten. Eine gleichermaßen wirkungsvolle wie auch effiziente Lösung.

Selbstverständlich wurden hinsichtlich Qualität und Performance keinerlei Kompromisse eingegangen. Das hochwertige Schwalbenschwanz-Gelenk der Maulteile gewährleistet, nach wie vor, ein optimales Stanzverhalten und das über einen langen Zeitraum.



Die eine perfekte Arthroskopie-Stanze gibt es nicht

Deswegen sind **ARTHROline**-Stanzen in zahlreichen Varianten mit unterschiedlichen Maulteilformen, sowie auf- und abgebogenem Schaft oder Maulteil verfügbar. Speziell in der Meniskus Chirurgie gilt das Motto, soviel wie nötig so wenig wie möglich. Um dieser Anforderung gerecht zu werden ist es wichtig entsprechend der Lage einer Läsion das richtige Instrument verfügbar zu haben.

Egal ob sich die Läsion am Hinterhorn, am lateralen oder medialen Meniskus, im anterioren oder posterioren Meniskusanteil lokalisieren lässt, **ARTHROline** bietet die perfekte Lösung für einen optimalen Zugang.

Überzeugen Sie sich selbst!



Stanzen

für die Verwendung bei Knie- und Schulterarthroskopien



ARTHROline	Maulteil (Höhe x Breite)	Schnittbreite	NL	gerade	links gebogen	rechts gebogen	Schaft aufge- bogen	Maul aufge- bogen	Artikel-Nr.
Stanze B 4,6mm H 1,6mm bewegl. Maulteil gezahnt  Schnittbild: 	1,6 x 4,6 mm	3,3 mm	120 mm	•					89140.0105
Stanze B 4,6mm H 1,6mm bewegl. Maulteil gezahnt  Schnittbild: 	1,6 x 4,6 mm	3,3 mm	120 mm					•	89140.0102
Stanze B 4,6mm H 1,6mm bewegl. Maulteil gezahnt  Schnittbild: 	1,6 x 4,6 mm	3,3 mm	120 mm				•		89140.0122
Stanze B 5,5mm H 1,6mm bewegl. Maulteil gezahnt  Schnittbild: 	1,6 x 5,5 mm	3,3 mm	120 mm		•			•	89140.0101
Stanze B 5,5mm H 1,6mm bewegl. Maulteil gezahnt  Schnittbild: 	1,6 x 5,5 mm	3,3 mm	120 mm			•		•	89140.0103

Hakenstanzen / Korbstanzen für die Verwendung bei Knie- und Schulterarthroskopien




ARTHROline	Maulteil (Höhe x Breite)	Schnittbreite	NL	gerade	Maul aufgebogen	Artikel-Nr.
Hakenstanze B 3mm H 1,6mm  Schnittbild: 	1,6 x 3,0 mm	1,8 mm	120 mm	•		89140.0205
Hakenstanze B 3mm H 1,6mm  Schnittbild: 	1,6 x 3,0 mm	1,8 mm	120 mm		•	89140.0202
Korbstanze B 6,5mm H 2,1mm oval  Schnittbild: 	2,1 x 6,5 mm	4,5 mm	120 mm	•		89140.0305
Korbstanze B 6,5mm H 2,1mm oval  Schnittbild: 	2,1 x 6,5 mm	4,5 mm	120 mm		•	89140.0302
Hakenstanze B 4mm H 2,1mm  Schnittbild: 	2,1 x 4,0 mm	2,1 mm	120 mm	•		89140.0405
Hakenstanze B 4mm H 2,1mm  Schnittbild: 	2,1 x 4,0 mm	2,1 mm	120 mm		•	89140.0402




ARTHROline	Maulteil (Höhe x Breite)	Schnittbreite	NL	gerade	retrograd schneidend	Maul auf- gebogen	Artikel-Nr.
Scherenstanze B 2,4mm H 2,1 mm  Schnittbild: 	2,1 x 2,4 mm	0,9 mm	120 mm	•			89140.0505
Scherenstanze B 2,4mm H 2,1 mm  Schnittbild: 	2,1 x 2,4 mm	0,9 mm	120 mm			•	89140.0502
Stanze B 5,7mm H 4mm retrograd links schneidend  Schnittbild: 	4,0 x 5,7 mm	2,3 mm	120 mm	•	links		89140.0605
Stanze B 5,7mm H 4mm retrograd rechts schneidend  Schnittbild: 	4,0 x 5,7 mm	2,3 mm	120 mm	•	rechts		89140.0602

COXARTIS-Stanzen für die Verwendung bei Hüftarthroskopien

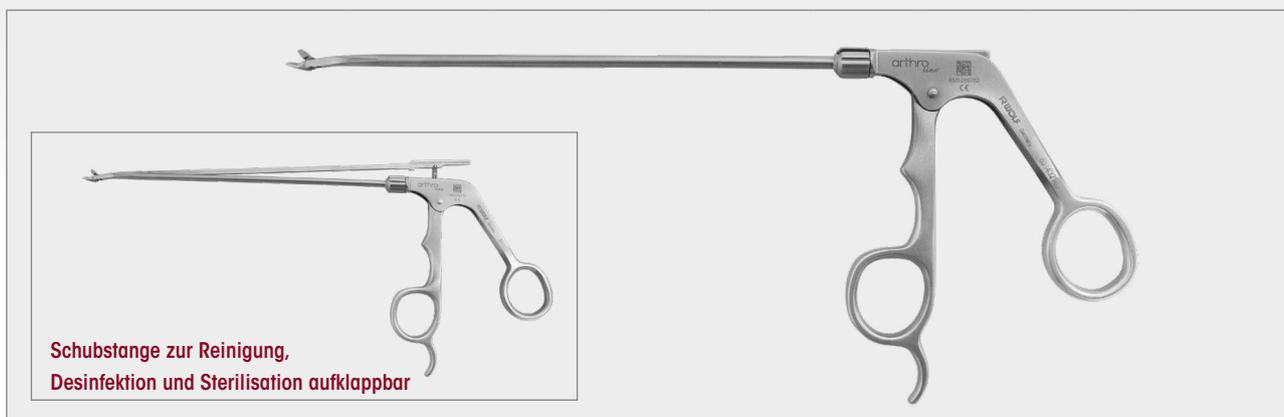


ARTHROline	Maulteil (Höhe)	NL	gerade	links gebogen	rechts gebogen	Schaft aufgebogen	Maul aufgebogen	Artikel-Nr.
Stanze NL 180mm H 1,6mm  Schnittbild: <input type="checkbox"/>	1,6 mm	180 mm	•				•	891432102
Stanze NL 180mm H 1,6mm  Schnittbild: <input type="checkbox"/>	1,6 mm	180 mm		•			•	891432101
Stanze NL 180mm H 1,6mm  Schnittbild: <input type="checkbox"/>	1,6 mm	180 mm			•		•	891432103
Stanze NL 180mm H 1,6mm  Schnittbild: <input type="checkbox"/>	1,6 mm	180 mm				•	•	891432122

Saugstanzen mit integriertem Saugkanal

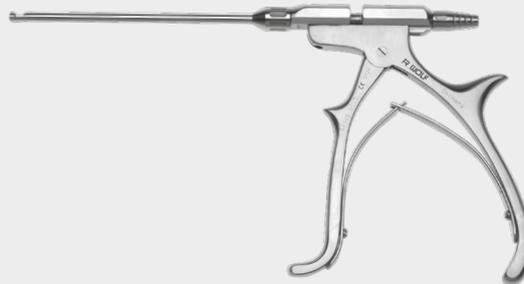

ARTHROline	Ø	NL	Artikel-Nr.
Saugstanze Ø 2,7 mm mit integriertem Saugkanal zerlegbar 	2,7 mm	110 mm	89140.0027
Saugstanze Ø 4,5 mm mit integriertem Saugkanal zerlegbar 	4,5 mm	110 mm	89140.0045

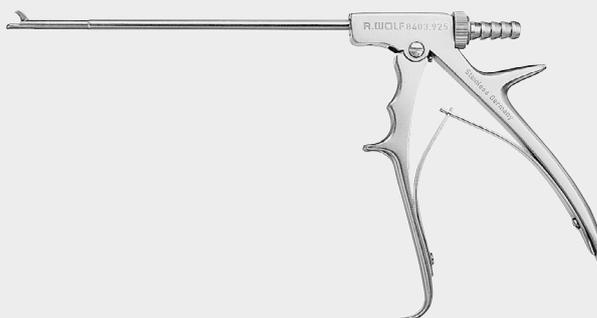

ARTHROline	Ø	NL	Artikel-Nr.
Saugstanze Ø 4,5 mm mit integriertem Saugkanal gerade 	4,5 mm	130 mm	8403.925

Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass nicht jedes Produkt in allen Ländern verfügbar ist. Bitte nehmen Sie die produktbegleitenden Informationen stets zur Kenntnis.
Für genaue Informationen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder direkt an die Richard Wolf GmbH.

B726de090922

