

## O Futuro da Toracoscopia Diagnóstica



**Conjunto de  
Mini Toracoscopia**

para técnica de portal único

# Conjunto de Mini Toracoscopia


para técnica de portal único



spirit of excellence

Este é um instrumental compacto (all-in-one) para toracoscopia com punção única que permite tratamento diagnóstico minimamente invasivo com uma pequena incisão. Com um pequeno trocater, o procedimento é possível com anestésicos locais e sem estresse doloroso para o paciente no pós cirúrgico .

- Conjunto de Toracoscopia muito pequeno, com apenas 5,5 mm de diâmetro
- Ótima qualidade de imagem com 50.000 pixels
- Grande canal de trabalho para instrumentos de até 3,5 mm
- Método muito atraumático para o paciente - redução da dor
- Sucção de fluidos possível com o instrumento inserido
- Nenhuma lente na haste, isso significa que a quebra da lente é minimizada
- A pinça de biópsia fornece amostras de tecido de alta qualidade
- Os instrumentos de trabalho são facilmente modificados e estão sempre no campo de visão
- Design ergonômico

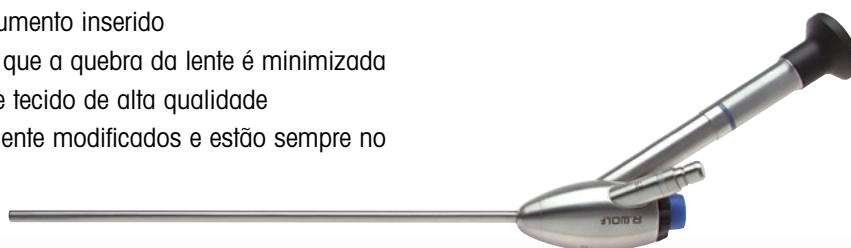

## Endoscópio op compl "Leipzig Egg"

Composto por:

Conjunto operacional de toracos-copia de 5,5 mm com canal de trabalho de 3,5 mm, direção de visão 0 °, WL 215 mm, (8920.401), válvula de membrana, amarela (89.103), Válvula de vedação (8920.311), tampa da válvula (15176.020) ..... 8920.4011

## Trocater flexível, Ø 5,5 mm,

Bainha de plástico com rosca, ponta distal, WL 60 mm ..... 8905.331  
também:  
Trocater, esférico ..... 8905.3315

## Trocater flexível, Ø 5,5 mm,

Plástico, WL 75 mm ..... 8906.051  
também:  
Trocater, Ponta cônica sem corte ..... 8906.151

## Fórc. tipo colh. dup. mono Ø

**3,5mm compl**, modular, em forma de colher, WL 310 mm, isolado  
Composto por:

Manopla com trava rotativa HF (83930074), haste externa, monopolar (8391933), pinça dupla concha após "Hürtgen" (8391216).....83912167

## Eletrodo Hook,

monopolar, Ø 3,5 mm, WL 310 mm ..... 8379.452

## Eletrodo de coagulação,

monopolar, Ø 3,5 mm, WL 310 mm ..... 8379.462

## Sonda

Ø 3,5 mm, graduada, WL 310 mm ..... 8379.672

## Cabo de fibra ótica compl

Composto por:

Cabo de fibra de luz (80662523), adaptador (8095.07), adaptador (809509).....806625231

## Peneira para endoscópio

Admissão: Endoscópio, para preparação mecânica, esterilização, armazenamento e transporte .....38008