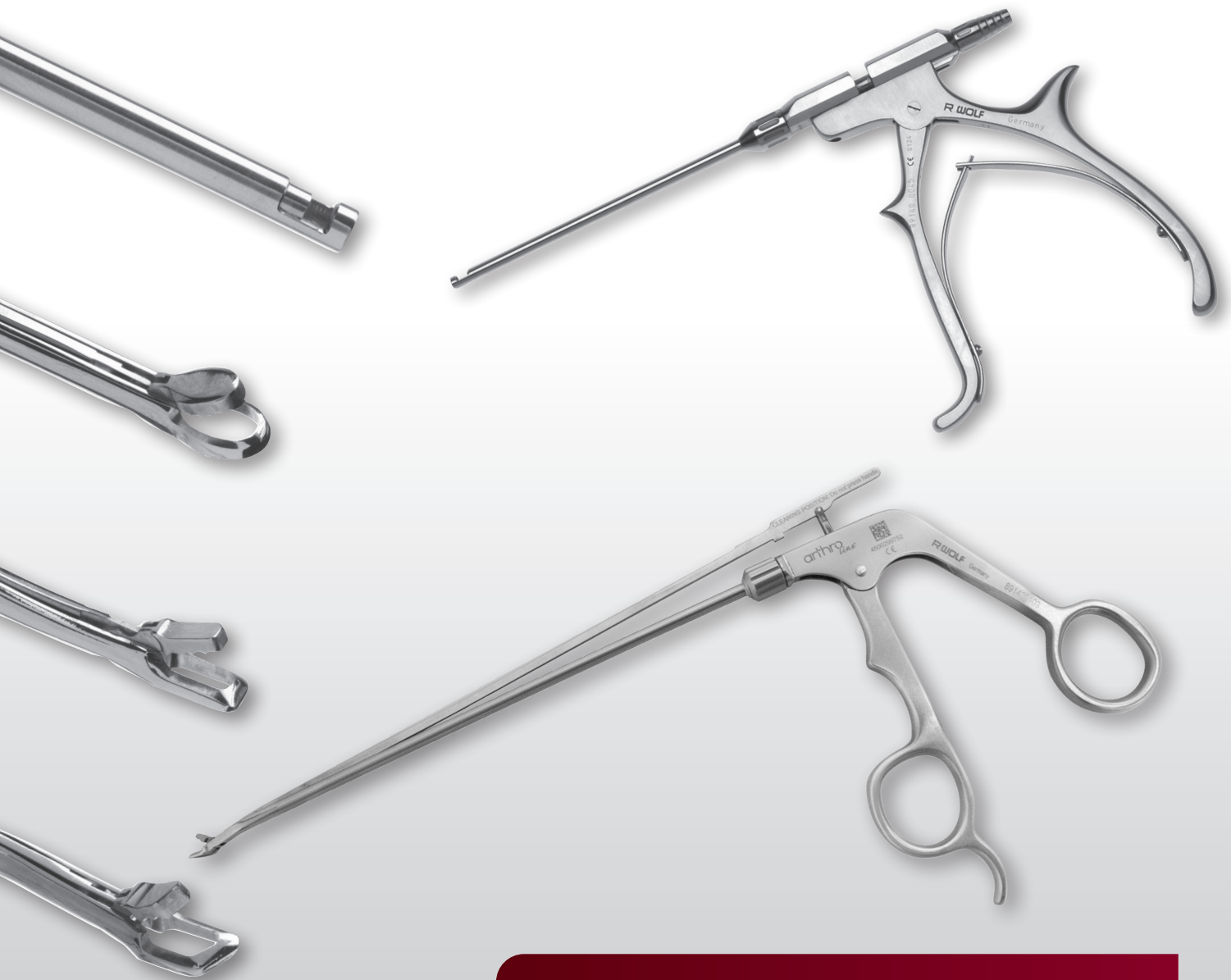


Punzones fuera de lo común



arthro
line

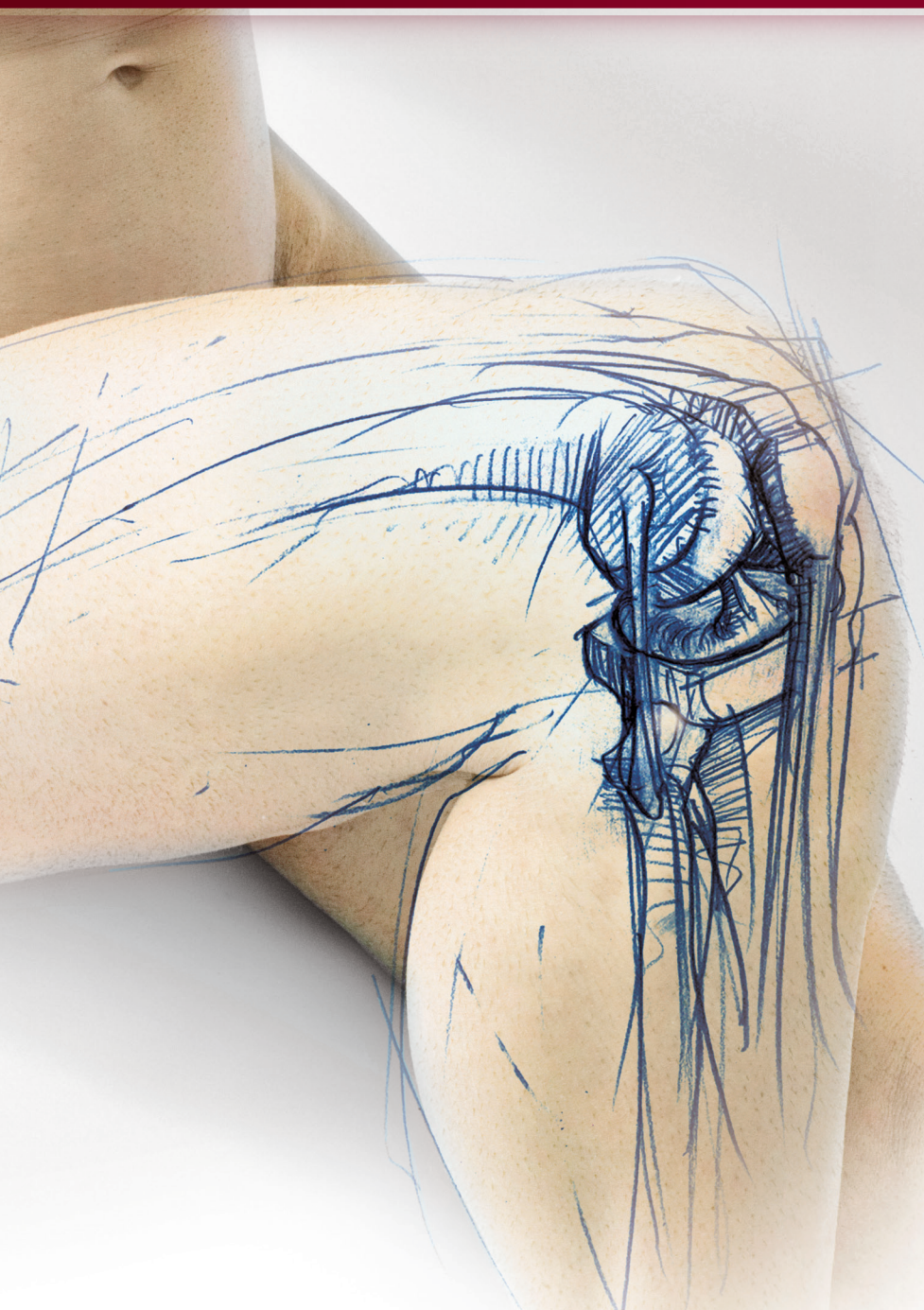
Calidad Premium
para las máximas exigencias

arthro line

Calidad Premium para las máximas exigencias

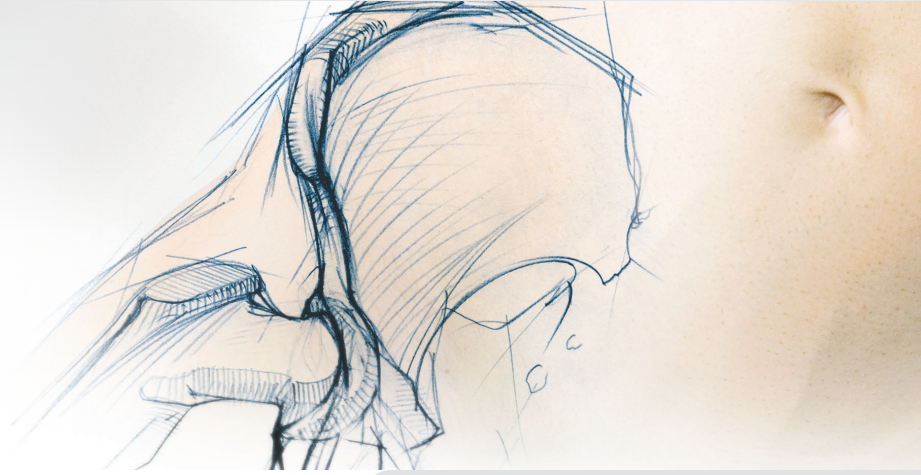
Punzones ARTHROline:

- Corte perfecto
- Menos esfuerzo
- Mango ergonómico
- Desmontable



En la última generación de los reconocidos punzones **ARTHROline** se ha optimizado el reprocesamiento para cumplir con los requisitos higiénicos más exigentes.

Gracias a un mecanismo especial, la barra de empuje puede abrirse para el reprocesamiento, garantizando así un enjuague completo y que los residuos se eliminen de forma segura. Durante la limpieza, la barra de empuje se mantiene en la posición abierta gracias a la fuerza del muelle. Una solución tan efectiva como eficaz. Tampoco se han hecho concesiones en términos de calidad ni de rendimiento. La articulación en cola de golondrina de alta calidad de las mandíbulas garantiza, igual que antes, un rendimiento óptimo de perforación durante mucho tiempo.



El punzón de artroscopia perfecto no existe

Por ese motivo, los punzones **ARTHROline** se ofrecen en múltiples versiones con diferentes formas de mandíbula, así como con vainas o mandíbulas curvadas hacia arriba y hacia abajo.

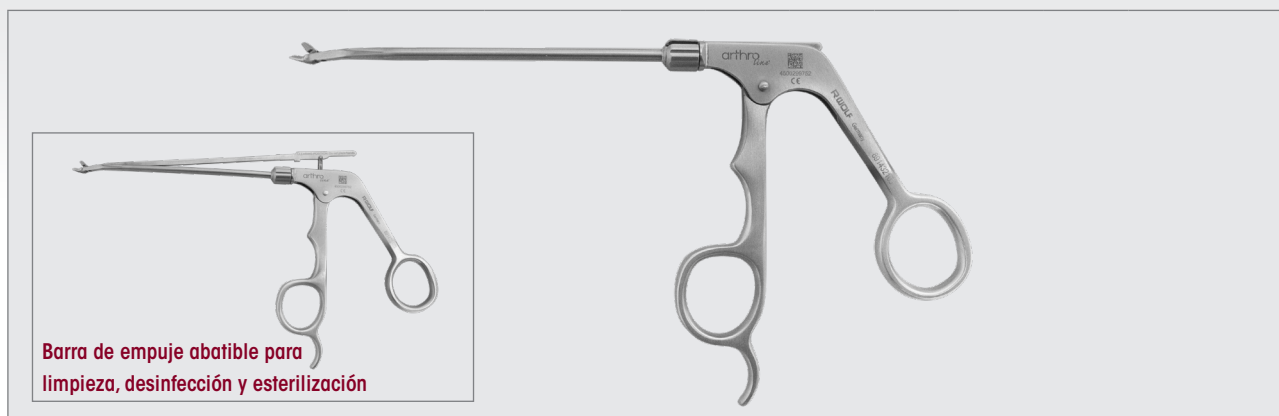
Especialmente en la cirugía de menisco, se cumple la máxima «tanto como sea necesario y tan poco como sea posible». Para conseguirlo, es importante disponer del instrumento adecuado según la ubicación de la lesión.




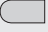






Tanto si la lesión se localiza en el cuerno posterior, en el menisco lateral o medial o en la porción meniscal anterior o posterior, **ARTHROline** ofrece la solución perfecta para un acceso óptimo.

¡Convéncase por sí mismo!



Punzones para artroscopias de hombro y rodilla



ARTHROline	Mandíbulas (altura x ancho)	Ancho de corte	LU	Recto	Curvado a la izquierda	Curvado a la derecha	Vaina curvada hacia arriba	Mandíbula curvada hacia arriba	N.º de artículo
Punzón An 4,6 mm Al 1,6 mm Mandíbulas dentadas móviles  Sección transversal: 	1,6 x 4,6 mm	3,3 mm	120 mm	•					89140,0105
Punzón An 4,6 mm Al 1,6 mm Mandíbulas dentadas móviles  Sección transversal: 	1,6 x 4,6 mm	3,3 mm	120 mm					•	89140,0102
Punzón An 4,6 mm Al 1,6 mm Mandíbulas dentadas móviles  Sección transversal: 	1,6 x 4,6 mm	3,3 mm	120 mm				•		89140,0122
Punzón An 5,5 mm Al 1,6 mm Mandíbulas dentadas móviles  Sección transversal: 	1,6 x 5,5 mm	3,3 mm	120 mm		•			•	89140,0101
Punzón An 5,5 mm Al 1,6 mm Mandíbulas dentadas móviles  Sección transversal: 	1,6 x 5,5 mm	3,3 mm	120 mm			•		•	89140,0103




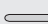




Punzones de gancho y punzones de cesto para artroscopias de hombro y rodilla



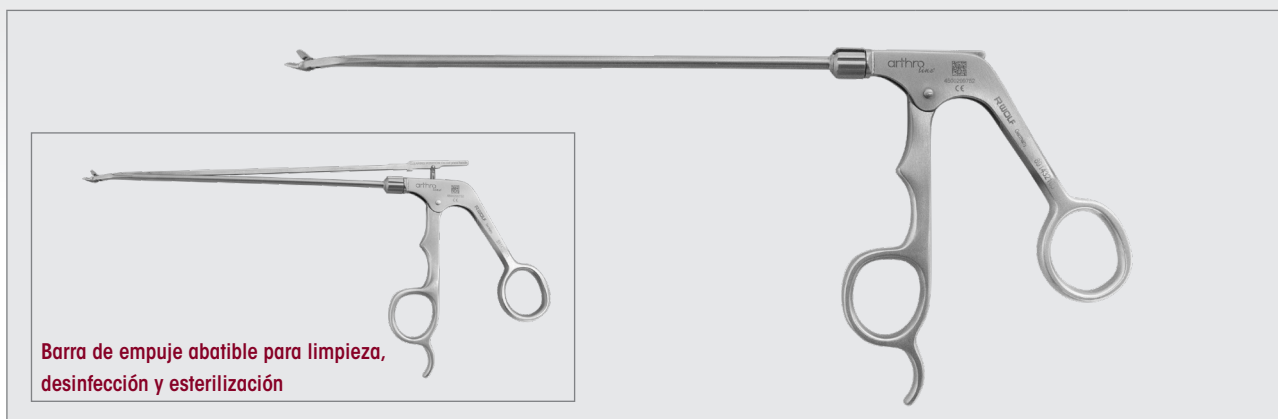
ARTHROline	Mandíbulas (altura x ancho)	Ancho de corte	LU	Recto	Mandíbula curvada hacia arriba	N.º de artículo
Punzón de gancho An 3 mm Al 1,6 mm  Sección transversal: 	1,6 x 3,0 mm	1,8 mm	120 mm	•		89140.0205
Punzón de gancho An 3 mm Al 1,6 mm  Sección transversal: 	1,6 x 3,0 mm	1,8 mm	120 mm		•	89140.0202
Punzón de cesto An 6,5 mm Al 2,1 mm ovalado  Sección transversal: 	2,1 x 6,5 mm	4,5 mm	120 mm	•		89140.0305
Punzón de cesto An 6,5 mm Al 2,1 mm ovalado  Sección transversal: 	2,1 x 6,5 mm	4,5 mm	120 mm		•	89140.0302
Punzón de gancho An 4 mm Al 2,1 mm  Sección transversal: 	2,1 x 4,0 mm	2,1 mm	120 mm	•		89140.0405
Punzón de gancho An 4 mm Al 2,1 mm  Sección transversal: 	2,1 x 4,0 mm	2,1 mm	120 mm		•	89140.0402









Punzones y punzones de tijera para artroscopias de hombro y rodilla



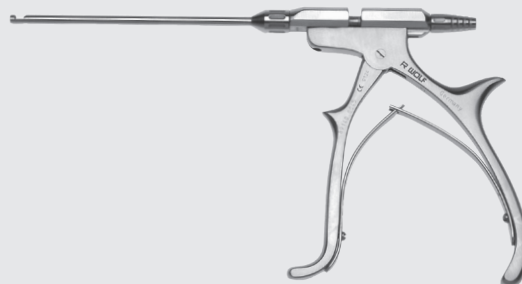
ARTHROline	Mandíbulas (altura x ancho)	Ancho de corte	LU	Recto	Cortante retrógrado	Mandíbula curvada hacia arriba	N.º de artículo
Punzón de tijera An 2,4 mm Al 2,1 mm  Sección transversal: 	2,1 x 2,4 mm	0,9 mm	120 mm	•			89140.0505
Punzón de tijera An 2,4 mm Al 2,1 mm  Sección transversal: 	2,1 x 2,4 mm	0,9 mm	120 mm			•	89140.0502
Punzón An 5,7mm Al 4mm cortante retrógrado a izquierda  Sección transversal: 	4,0 x 5,7 mm	2,3 mm	120 mm	•	a la izquierda		89140.0605
Punzón An 5,7mm Al 4mm Cortante retrógrado a derecha  Sección transversal: 	4,0 x 5,7 mm	2,3 mm	120 mm	•	a la derecha		89140.0602



Punzones COXARTIS para artroscopias de cadera

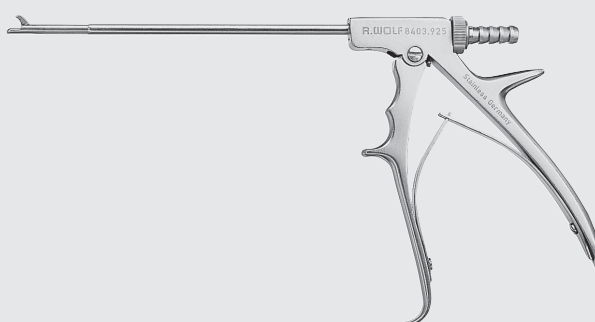



ARTHROline	Mandíbulas (altura)	LU	Recto	Curvado a la izquierda	Curvado a la derecha	Vaina curvada hacia arriba	Mandíbula curvada hacia arriba	N.º de artículo
Punzón LU 180 mm Al 1,6 mm  Sección transversal: 	1,6 mm	180 mm	•				•	891432102
Punzón LU 180 mm Al 1,6 mm  Sección transversal: 	1,6 mm	180 mm		•			•	891432101
Punzón LU 180 mm Al 1,6 mm  Sección transversal: 	1,6 mm	180 mm			•		•	891432103
Punzón LU 180 mm Al 1,6 mm  Sección transversal: 	1,6 mm	180 mm				•	•	891432122

Punzón de aspiración con canal de aspiración integrado



ARTHROline	Ø	LU	N.º de artículo
Punzón de aspiración Ø 2,7 mm con canal de aspiración integrado desmontable 	2,7 mm	110 mm	89140.0027
Punzón de aspiración Ø 4,5 mm con canal de aspiración integrado desmontable 	4,5 mm	110 mm	89140.0045



ARTHROline	Ø	LU	N.º de artículo
Punzón de aspiración Ø 4,5 mm con canal de aspiración integrado Recto 	4,5 mm	130 mm	8403.925

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones. Queremos aclarar que algunos productos no están disponibles en todos los países. Tenga siempre en cuenta la información que acompaña al producto. Si desea obtener información más detallada, diríjase a su persona de contacto o directamente a la empresa Richard Wolf GmbH.

B726es090922

