



Flexible Sensor-Bronchoskope für die ENDOCAM D

Kompakt, flexibel, effizient


Flexible Sensor-Bronchoskope für die ENDOCAM D

Kompakt, flexibel, effizient

Die COVID-19-Pandemie hat einmal mehr gezeigt, welche herausragende Stellung den bronchoskopisch tätigen Abteilungen in der Patientenversorgung zukommt.

Insbesondere die flexible Bronchoskopie ist in der Pneumologie, in der Intensivmedizin oder auch in der Anästhesie von besonderer Bedeutung. Sei es für die Intubation, Absaugung oder auch für diagnostische und therapeutische Eingriffe – flexible Bronchoskope verfügen über ein breites Anwendungsspektrum und lassen sich zudem ausgesprochen patientenschonend anwenden.

Die überarbeiteten Richard Wolf Sensor-Bronchoskope bieten hier eine interessante Alternative – wiederverwendbar, sofort einsatzbereit, mit schlankem Controller – sind sie bestens für die verschiedenen Aufgaben geeignet.

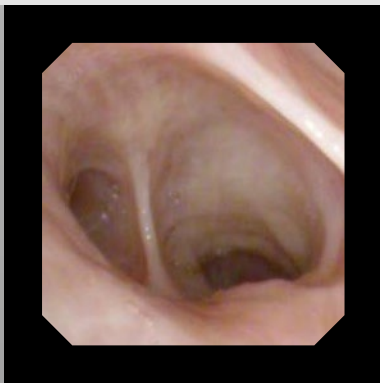


Abwinklung +180°/-140°



Flexible 1-Kanal Sensor-Bronchoskope

- 5,2 mm oder 6,2mm Außendurchmesser der atraumatischen, distalen Endoskopspitze
- 2,2 mm und 3,0 mm Arbeitskanaldurchmesser
- 600 mm Nutzlänge
- +180°/-140°-Abwinklung auf-/abwärts
- Beleuchtung über zwei distale LEDs
- In der Instrumentenspitze integrierter Bildsensor – direkte Bilderfassung ohne Übertragungsverluste
- Aufnahme von Einzelbildern und Videosequenzen mittels Bedientasten am Handgriff
- Ergonomisches Griffdesign
- Axialer Kabelabgang
- Kompatibel mit **ENDOCAM D**

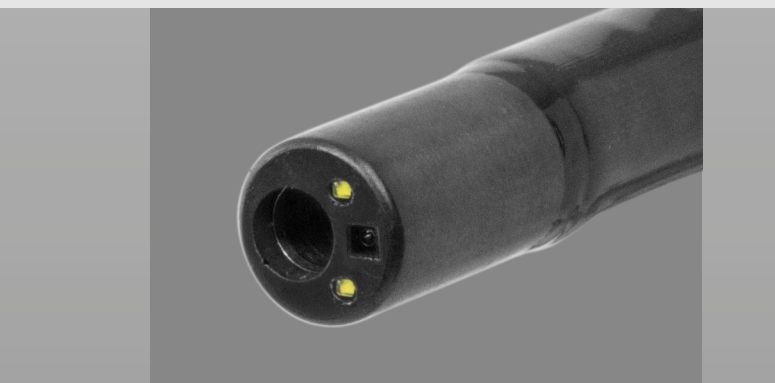

Außendurchmesser 5,2 mm und 6,2 mm



Flexible Sensor-Bronchoskope für die ENDOCAM D



spirit of excellence

Bestellinformationen und technische Daten

Sensor-Bronchoskope für ENDOCAM D:

Sensor-Bronchoskop D
Ø 5,2 mm NL 600 mm 7252001

Sensor-Bronchoskop D
Ø 6,2 mm NL 600 mm 7262001

Kameracontroller:

ENDOCAM D Kameracontroller kpl

bestehend aus:

ENDOCAM D Kameracontroller (5522101), Kabel HDMI / DVI-D Verriegelbar 3,0 m (103843), Koaxkabel Vektor Plus 3,0 m (DZGR-0300-SW-GN), Lizenz für Open Source Software (72321911), Netzkabel (2440.03) 55221011

Zubehör für Sensor-Bronchoskope D:

Reinigungsbürste
Ø 3 mm GL 1200 mm 7990002

Reinigungsbürste
Ø 5 mm GL 1200 mm 7990005

Biopsieventil-Aufnahme 15114175

Dichtventil kpl. (single use, 20 Stück) 15114052

Absaugventil für Bronchoskop
(single use, 20 Stück) 4565901M

Spüladapter 163912

Druckausgleichsventil 163904

Dichtigkeitstester für flex. Endoskope 163903

Reinigungsbürste 8690

Luer-Verschlußkappe 15023205

Reinigungsbürste

doppelt konisch gerade 7980002

Siebkorb für flexible Endoskope 33016

Monitore:

LCD color display (Medizinischer FHD Monitor 21,5") FS-E2102D

Monitor Standfuß SU-600MD

CuratOR LX1910-S mit Standfuß (Medizinischer LCD Monitor 19") 6GF62102JL01

CuratOR LX1910 ohne Standfuß (Medizinischer LCD Monitor 19") 6GF62102JL10

Technische Daten Sensor-Bronchoskope D		
	7252001	7262001
Anzahl der Arbeitskanäle	1	1
Außendurchmesser	5,2 mm	6,2 mm
Arbeits- / Spülkanal Ø	2,2 mm	3,0 mm
Abwinklung	+180°/-140°	
Nutzlänge	600 mm	
Bildwinkel	120°	
Beleuchtung	Zwei LEDs	
Handgriff	Ergonomisch geformter Handgriff mit axialem Kabelabgang	
Position des Arbeits- und Spülkanals im Bild	auf 3 Uhr	
Distale Fläche		
Endobild	Quadratisch, digitaler 2,5-fach Zoom; Weißabgleich, Lichtsteuerung und Fokussierung automatisch	
Passender Kameracontroller	ENDOCAM D (55221011)	

