

Ayez confiance  
dans l'original







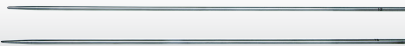


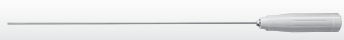

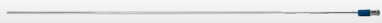
**Néphroscope miniature  
15 / 18 Charr. selon Lahme**

Petit pourtour de chemise - Stabilité extraordinaire

# Néphroscope miniature

## 15 / 18 Charr. selon Lahme

**Néphroscope miniature percutané à basse pression et irrigation continue selon Lahme**  
composé de :

Endoscope et accessoires	
	<b>Endoscope d'opération PANOVIEW</b> , direction de visée 12°, ø extérieur 12 Charr., LU 225 mm, à visée décalée latéralement, canal de travail 6 Charr., soupape automatique avec membrane d'étanchéité ..... 8968.421 à utiliser avec : Soupape d'étanchéité universelle stérile, UE = 5 pièces ..... 4712348
	<b>Chemise à irrigation continue</b> , ronde, LU 205 mm, avec anneau d'irrigation rotatif, extrémité distale droite, verrouillage automatique 15 Charr. .... 8968.001 18 Charr. .... 8968.011
	<b>Obtuteur</b> , creux au centre pour chemise 8968.001 ..... 8968.101 pour chemise 8968.011 ..... 8968.111
	<b>Guide d'Amplatz</b> , 18 Charr., LU 150 mm ..... 8968.041
Instruments d'abord	
	<b>Dilatateur</b> , LU 320 mm, pour la dilatation par bougies ONE-STEP, acier inox 12 Charr., compatible avec chemise 15 Charr. .... 8968.012 15 Charr., compatible avec chemise 18 Charr. .... 8968.015
Instruments	
	<b>Pince pour saisir les calculs</b> , ø 2,0 mm, LU 365 mm, avec protection contre les surcharges et à dents de souris ..... 8968.601
	<b>Griffe pour calculs à trois bras</b> , ø 2,0 mm, LU 365 mm ..... 8968.671 à utiliser avec : Pince pour saisir les calculs de rechange, à trois bras ..... 8968.675
	<b>Sonotrode ultrasonore</b> , ø 1,9 mm, LU 340 mm ..... 8962.519
	<b>Pince à saisir « HySafe »</b> , à dents de brochet, 6 Charr., LU 410 mm ..... 8968.6802
	<b>Sonde Lithoclast</b> , ø 2,0 mm, LU 425 mm ..... 8742.004

- Voici le premier néphroscope miniature conçu tout particulièrement pour la miniperc : Ayez confiance dans l'original
- Une alternative à la lithotritie extracorporelle par ondes de choc pour les calculs caliciels inférieurs grands
- Convient également aux enfants et adolescents

- Dilatateurs en acier inox pour la dilatation par bougies ONE-STEP à réaliser en peu de temps
- Verrouillage automatique de l'optique
- Introduction sûre et rapide des instruments auxiliaires grâce à la garniture automatique du canal de travail
- Tout petit pourtour de la chemise et construction tout de même robuste grâce à l'emploi de titane et acier inox

Veuillez nous contacter également pour les kits à usage unique destinés à la NLPC.